




EVOOCH

## 取扱説明書

---

# EVH-FC02 マルチエステ美顔器

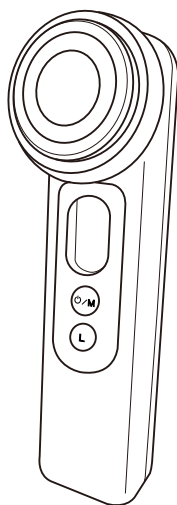

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

# 目次

---

## ▶ はじめに

目次 ..... 1～2ページ

各部名称 ..... 3ページ

安全上のご注意 ..... 4～14ページ

## ▶ 使い方・お手入れ

ご使用前の準備 ..... 15～16ページ

操作方法 ..... 17～20ページ

ご使用前のプレテスト ..... 21～23ページ

ご使用方法 ..... 24～26ページ

よくあるご質問 ..... 27～28ページ

# 目次

---

## ▶ 使い方・お手入れ

日常の点検・お手入れ ..... 29ページ

保管のしかた ..... 30ページ

## ▶ 困ったときは

故障かな? ..... 31～33ページ

アフター販売 ..... 34ページ

アフターサービス ..... 35～36ページ


カスタマーサポートセンター ..... 37ページ

仕様 ..... 38ページ


# 各部名称

[目次へ↑](#)

## ▶ 本体

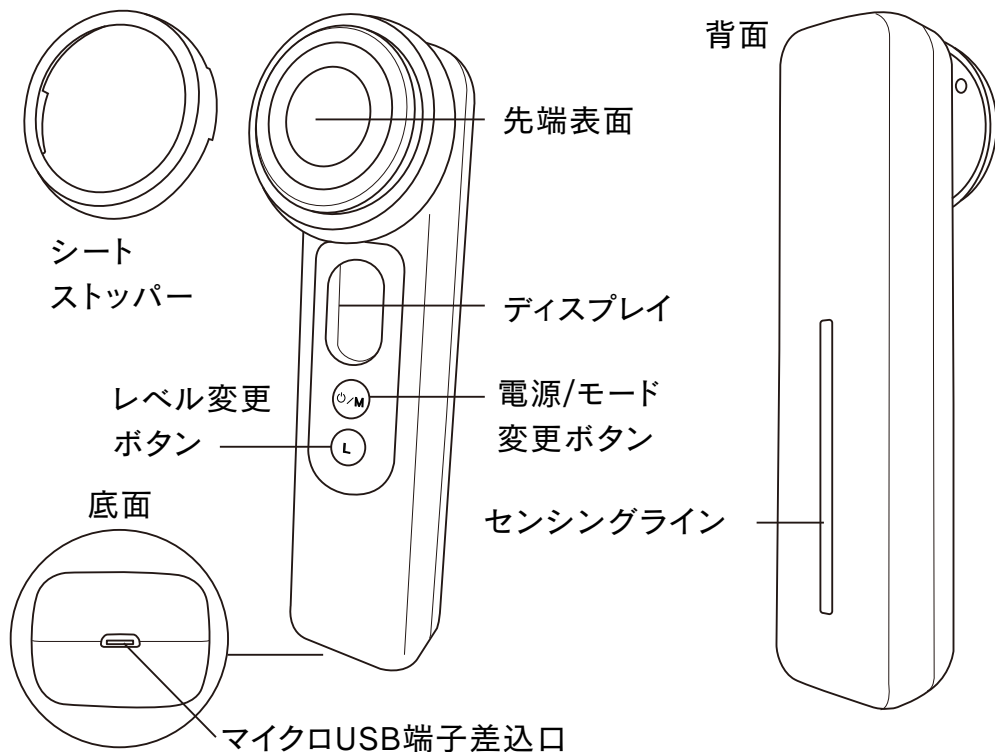

## ▶ 付属品

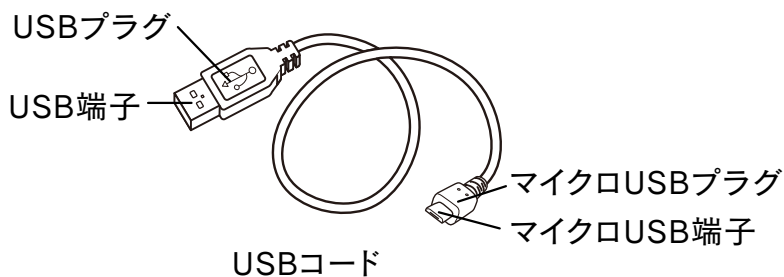

# 安全上のご注意

[目次へ↑](#)

必ずお守りください

本製品は家庭用です。



警告

## Li-ion リチウムイオンポリマー電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

# 安全上のご注意

---

- 下記の医療用電子機器を使用している方は使用しないでください。
  - ・ペースメーカー等の体内埋込型医療用電子機器
  - ・心電計等の装着型医療用電子機器
  - ・人工肺等の生命維持用医療用電子機器
- 下記に該当する方は使用しないでください。
  - ・肌に関する事項で医師の治療を受けている
  - ・小さなお子様・飲酒後・皮膚感覚が鈍い
  - ・急性疾患、結核性疾患、高血圧、伝染病疾患、悪性疾患、内臓疾患、糖尿病、心臓疾患、出血性疾患のいずれかに該当する
  - ・皮膚病、アトピー性皮膚炎、敏感肌または肌が弱い、皮膚トラブルがある、アレルギー体質のいずれかに該当する
  - ・発熱している、疲労している、体調がすぐれない
  - ・物理的的刺激等による病的なシミがある
  - ・生理中、妊娠中、授乳中のいずれかに該当する
  - ・ステロイド等の薬を継続的に使用している
  - ・肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている
  - ・除毛や脱毛をした当日
  - ・日焼け直後
  - ・ピーリング直後
  - ・自分で意思表示ができない

# 安全上のご注意

---

## 警告

修理技術者以外の方は、絶対に分解・改造・修理を行わないでください。



発火したり、異常動作したりして怪我をするおそれがあります。

改造禁止

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。



やけど・部品を誤飲するおそれがあります。

禁止

USBコードを傷つけないでください。



加工したり、引っ張ったり、上に物をのせたりすると破損して、火災・感電の原因となります。

禁止

# 安全上のご注意

## 警告

お手入れは必ずUSBコードを抜いてから行ってください。



感電や怪我をするおそれがあります。

強制

定期的にUSB端子のホコリを掃除してください。



ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

強制

USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。



ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBコードが溶けたり変形したりして感電や火災の原因となります。

強制

USBプラグを抜くときは、USBコードを持たずに必ず先端のUSBプラグを持って抜いてください。



感電やショートの原因となります。

強制



# 安全上のご注意

## 警告

高温になる場所での充電はしないでください。



禁止

ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。

液漏れしたら火気から遠ざけてください。



強制

リチウムイオンポリマー電池が液漏れしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂、発火する原因となります。

過剰な連続使用はしないでください。



禁止

やけど、怪我の原因となります。

本来の使用目的以外に使用しないでください。



禁止

事故や故障の原因となります。

# 安全上のご注意

---

## 警告

電源は付属のUSBコードをご使用ください。



火災・感電の原因となります。

強制

濡れた手でUSBプラグを抜き差ししないでください。



感電して怪我をするおそれがあります。

禁止

USB接続式ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力が5V0.5A以上出力できるACアダプターをご使用ください。



製品の定格入力5V0.5A以下のUSB接続式ACアダプターをご使用されると、USB接続式ACアダプターの故障の原因となります。

強制

# 安全上のご注意

---

## 警告

長期間使用しない時は、必ずUSBプラグを抜いてください。



絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。

強制

付属のUSBコードが傷んでいる、または差し込みが緩いときは使用しないでください。



感電やショートの原因となります。

禁止

異常に気づいたら使用を中止してください。



異臭・発熱・変色・変形・その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱・破裂・発火する原因となります。

強制

# 安全上のご注意

---

## 警告

ご使用時は40℃未満の環境でご使用ください。



強制

発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。

浴室など湿気が多い場所で使用しないでください。



禁止

発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。

# 安全上のご注意

## ⚠ 注意

本体に強い衝撃を加えないでください。



高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。故障の原因となります。

禁止

肌に異常がある箇所に使用しないでください。



傷等の悪化の原因となります。

禁止

本体を火中に投じないでください。



破裂して怪我をするおそれがあります。

禁止

本製品は45℃未満の場所で保管してください。



リチウムイオンポリマー電池の性能劣化の原因となります。

強制

# 安全上のご注意

---

## 注意

直射日光が当たる所に置かないでください。



禁止

リチウムイオンポリマー電池の性能劣化の原因となります。

炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。



禁止

液漏れ、発熱、発火などの原因となります。

使用中に気分が悪くなったり、肌に異常を感じた場合、使用を中止してください。



強制

肌トラブルの原因となるおそれがあります。

# 安全上のご注意

---

## 注意

アクセサリ等の金属を外して使用してください。



怪我をするおそれがあります。

強制

使用前に必ずプレテストを行い、使用した箇所の肌状態を確認してください。



肌トラブルの原因となるおそれがあります。異常を感じた場合は使用しないでください。

強制

お子様や体の不自由な方だけで使用しないでください。



怪我をするおそれがあります。

禁止


# ご使用前の準備

[目次へ↑](#)

## ▶使用可能箇所

下記の使用可能箇所を確認のうえご使用ください。

顔、デコルテ、首側面  
(右図色付以外の箇所)  
に使用可能です。

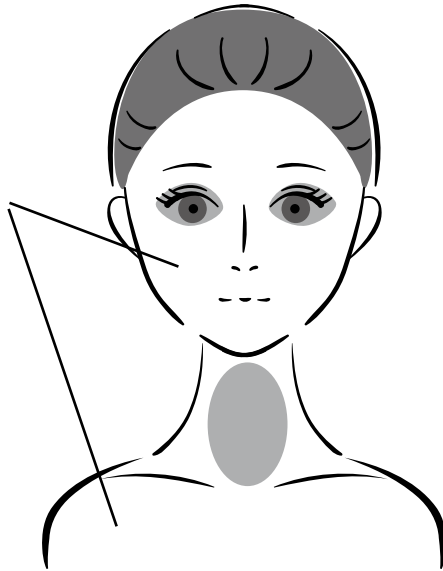

禁止

下記の箇所には使用しないでください。

- ・目、のど元
- ・肌に傷、にきび、湿しん、はれもの等がある箇所
- ・過去に手術をした箇所



# ご使用前の準備

---

[目次へ↑](#)

## ▶充電方法

- ・本体のマイクロUSB端子差込口にUSBコードのマイクロUSBプラグを差し込み、反対側のUSBプラグをお持ちの5V0.5Aが出力できるUSB接続式ACアダプターに差し込みます。
- ・充電中、ディスプレイの充電残量の表示が点滅します。点滅から点灯に変わったら充電完了です。
- ・充電時間は約4時間です。
- ・充電中は動作しません。
- ・長期間使用しなかった場合、または購入したばかりの場合は、まず充電をしてください。
- ・充電が完了したら、USBプラグを抜いてください。
- ・満充電時の合計使用可能時間は3時間（ABSORBモード・レベル最大時）です。


## ▶使用環境

- ・周辺温度が5～40℃、周辺湿度が20～75%

# 操作方法

[目次へ↑](#)

## ▶モード

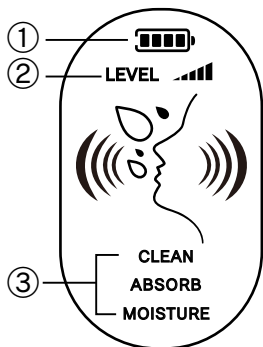

### ①充電残量

充電残量の表示。

### ②出力レベル

出力レベルの表示。

1～5段階の出力レベルが設定できます。

### ③出力モード

出力モードの表示。

3つのモードがあります。

## CLEANモード(イオン導出)

イオン導出により、老廃物や汚れを吸着します。EVOOCH美顔器専用シートを取り付けてご使用ください。(P24)

※物理的效果となります。

先端表面が振動し、電源を入れてから10～15秒後、45℃に発熱します。



# 操作方法

---

## ABSORBモード(イオン導入)

イオン導入により、肌へ美容成分が浸透するのを促進します。※角質層までとなります。

先端表面が赤色に点灯、振動し、電源を入れてから10～15秒後、45℃に発熱します。



## MOISTUREモード(EMS)

EMSとマイクロカレントにより、電気刺激を与え、肌にハリを与えます。※物理的効果となります。


先端表面が青色に点灯、振動し、電源を入れてから10～15秒後、45℃に発熱します。



# 操作方法


## ▶使用方法

- ・電源／モード変更ボタン(Ⓞ/M)を長押しします。「ピッ」という音が鳴り前回終了したモードで起動します。  
※初回起動時はCLEANモード

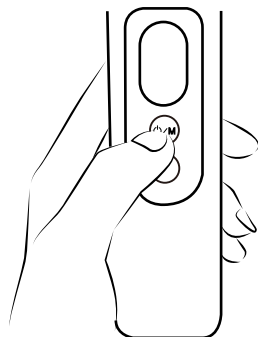

## ▶モード変更

- ・動作中に電源／モード変更ボタン(Ⓞ/M)を押すと、モードが変わります。

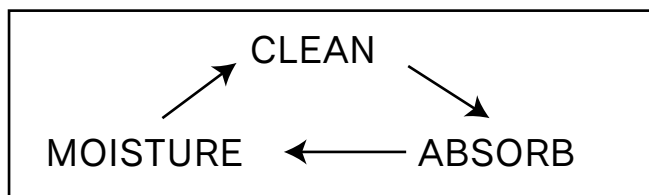

※ヘッドが肌に触れ、センシングラインに手の皮膚が当たっているときのみ振動します。

※電源をオンにした後、5分間操作しなかった場合は、切り忘れ防止機能が働き、「ピッピッピッ」と音が鳴り、電源がオフになります。

どちらも肌に触れている状態




# 操作方法

---

## ▶ レベル変更

- ・動作中に レベル変更ボタン④を  
押すと、出力レベルが変わります。

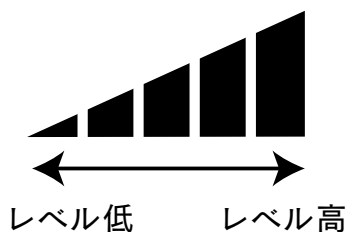

## ▶ 終了方法



- ・電源／モード変更ボタン⑤/Mを長押ししてください。「ピピッ」という音が鳴り停止します。



# ご使用前のプレテスト

[目次へ↑](#)

## ▶肌へのプレテスト

初めて本製品を使う際は、ご使用になる前に必ず肌へのプレテストを実施してください。

1. 腕の内側を洗浄し、清潔な状態にしてください。その後タオル等で水分を拭き取ってください。
2. 洗浄した部分に化粧水等を塗ってください。
3. 電源／モード変更ボタン  を長押し、起動させてください。
4. 電源／モード変更ボタン  を押し ABSORBモードに設定し、レベルは1のままに設定してください。

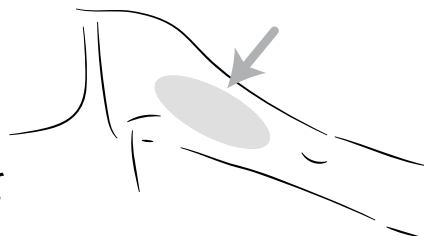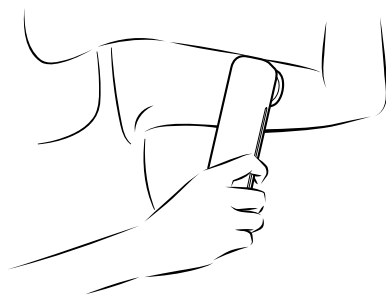

# ご使用前のプレテスト

---

5.化粧水等を塗った部分にヘッドを密着させ、徐々にレベルを上げながら3分間円を描くように動かしてください。


※同じ箇所にはヘッドを当て続けしないでください。

※プレテスト実施中は本製品を肌の上で絶えず滑らせて動かし続けてください。

※お手持ちのタイマー等で、3分間計ってください。

6.終了後肌から離し、電源／モード変更ボタン $\odot/M$ を長押しして電源を切ってください。

※プレテスト実施中に肌に異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。

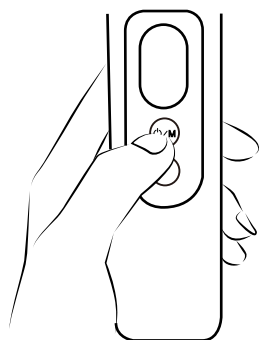

# ご使用前のプレテスト

---

プレテストから48時間以内に次の症状が現れた場合、本製品の使用はしないでください。

- 肌にあかみが出ていませんか？
- 肌が腫れていませんか？
- 水泡ができていませんか？
- 痛みを感じていませんか？
- 引きつりを感じていませんか？
- かゆみは出ていませんか？

1つでも項目に当てはまる場合は、本製品の使用はしないでください。その他、肌に異常を感じた場合も使用を中止してください。ご自身で判断できない場合、医師にご相談ください。




# ご使用方法

[目次へ↑](#)

## ▶EVOOCH 美顔器専用シートの付け方 (CLEAN モード時)

①シートストッパーをヘッドから取り外してください。

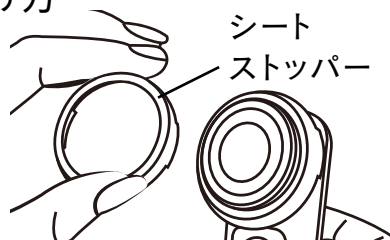

②EVOOCH美顔器専用シートをヘッドにかぶせ、シートストッパーをヘッドに装着してください。



③EVOOCH美顔器専用シートに十分な量の化粧水等を含ませてください。

※CLEANモード時、クリームやジェル状のものは、電気を通さない可能性があります。

※CLEANモード時以外にEVOOCH美顔器専用シートは不要です。

# ご使用方法

---

## ▶使い方

CLEANモード時は、本体にEVOOCH美顔器専用シートを付け(P24)、それ以外のモード時には、肌に化粧水等をつけてご使用ください。

### ●口元

- ・顎を起点に頬に向かって斜め上に、フェイスラインに沿って滑らせてください。鼻の下は半円を描くように滑らせてください。



### ●頬

- ・小鼻を起点にこめかみに向かって外側に滑らせてください。



### ●鼻

- ・鼻筋から額に向かって上に滑らせてください。また小鼻の周りを円を描くように滑らせてください。




# ご使用方法

---


## ●額

- ・額の内側から髪の毛の生え際に向かって滑らせてください。

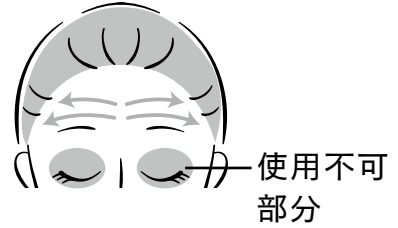

## ●デコルテ

- ・デコルテの内側から肩に向かって円を描くように滑らせてください。

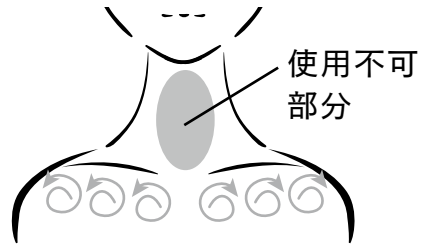

# よくあるご質問

---

[目次へ↑](#)

## ●顔以外にも使用可能ですか？

使用可能です。使用可能箇所（P15）をご確認ください。

## ●敏感肌にも使用可能ですか？

肌へのプレテスト（P21～P23）を実施してください。肌に異常がなければご使用いただけます。肌に異常を感じた場合、すぐに使用を中止し、ご自身で判断できない場合は医師にご相談ください。

## ●お風呂で使用可能ですか？

本体は防水仕様ではありません。浴室など本体に水やお湯がかかるおそれがある場所では使用しないでください。感電や発火の原因となります。

## ●毎日使用できますか？

週2～3回を目安にご使用ください。

# よくあるご質問

---

## ●化粧水等は1回でどれくらい使用すれば良いですか？

化粧水等を多く使用した方がよりそれぞれのモードを体感しやすくなります。目安としてEVOOCH美顔器専用シートを使用する場合、ヘッド全体がEVOOCH美顔器専用シートにつけた化粧水等で濡れるくらい使用してください。化粧水等が少ないと感じたら付け足すことをお勧めします。

## ●MOISTUREモード時に顔や手がピリピリするのですが？

EMSによる電気刺激です。Ⓛ ボタンで出力レベルの調節ができます。気持ちいいと感じる強さで使用してください。初めて使用する場合、使い方に慣れるまではレベル1で使用してください。

## ●マイクロカレントとは何ですか？

生体電流に似た極めて微弱な電流です。

# 日常の点検・お手入れ

---

[目次へ↑](#)

必ず電源を切った状態で行ってください。

1. ヘッドについた化粧水等を濡れた布等で拭き取ってください。

※アルカリ性の洗剤やアルコール、シンナー、ベンジンは使用しないで  
ください。

2. 表面についた水分等を拭き取ってください。

3. 本体は乾いた柔らかい布で拭いてください。

# 保管のしかた

---

[目次へ↑](#)

- ・ 長期間使用しないときは、本体のお手入れ及び充電をしてから保管してください。
- ・ 1カ月に1回は充電してください。
- ・ 子供の手の届かない場所に保管してください。
- ・ ストーブなど火気が近い場所、浴室等高温多湿の場所、車の中、直射日光が当たるなど高温になる場所、高い場所、不安定な場所等を避けて保管してください。
- ・ 保管時は、周辺温度が0～45℃で保管してください。

# 故障かな？

[目次へ↑](#)

## 充電ができない

原因	USB接続式ACアダプターの電源プラグがコンセントに差し込まれていない。
対処方法	電源プラグをしっかりとコンセントに差し込んでください。

## 電気刺激が強く感じる、痛い

原因	肌に先端表面が密着していない。
対処方法	肌にぴったりと先端表面を当ててください。
原因	水分が足りない。
対処方法	化粧水等を足してください。



## 故障かな？

---

### 本体が熱い

原因	連続で使用している。
対処方法	1時間以上電源を切った状態で、本体を休ませてください。

### 振動しない

原因	肌に先端表面が触れていない、またはセンシングラインに手の皮膚が当たっていない。
対処方法	センシングラインが手の皮膚に当たるようにしっかり握り、先端表面を肌に当ててください。

# 故障かな？

---

## 使用中肌が赤くなる

原因	同じ箇所当て続けている。
対処方法	先端表面を同じ箇所に当て続けしないでください。 必ず肌の上を滑らせるように動かし、赤みがひどいときはすぐに使用を中止してください。

## 使用中肌が熱くなりすぎる

原因	同じ箇所に当て続けている。
対処方法	先端表面を同じ箇所に当て続けしないでください。 必ず肌の上を滑らせるように動かし、熱すぎるときはすぐに使用を中止してください。


## 使用中に電源が切れた

原因	充電がなくなった。
対処方法	充電してください。


# アフター販売

---

[目次へ↑](#)

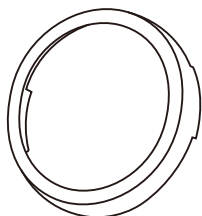

シートストッパー  
CS-K573  
990円(税込)

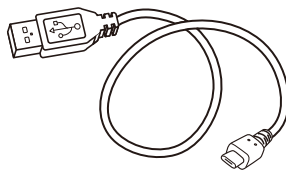

USBコード  
CS-K574  
660円(税込)



EVOOCH美顔器  
専用シート100枚入り  
EVH-FC01P1  
880円(税込)

弊社オフィシャルサイト(36ページ)にて本別売品、及び各製品の  
消耗品・部品のご注文を承っております。

お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。  
おります。

北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンター  
までお問い合わせください。

本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

# アフターサービス

---

[目次へ↑](#)

## ▶保証について

商品の品質には万全を期しておりますが、万一商品が破損・汚損していた場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取り替えさせていただきます。

補修用性能部品の生産終了後の保有期間は5年です。

その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

# アフターサービス

---

## ▶ 消耗品・部品のご注文

オフィシャルサイトにて消耗品  
及び部品のご注文を承っております。

[lifeonproducts-online.com](http://lifeonproducts-online.com)



※オフィシャルサイトにてお取り扱いの無い消耗品及び  
部品に関しましては、メールにてお問い合わせください。

## ▶ お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けて  
おります。17時以降のお問い合わせに関しましては、  
翌営業日中に返答をさせていただきます。

下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせ  
をお願いいたします。

[lifeonproducts.co.jp/contact/form2](http://lifeonproducts.co.jp/contact/form2)



ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目を  
ご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日

■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

# カスタマーサポートセンター

---

[目次へ↑](#)

ライフオンプロダクツ株式会社

＜カスタマーサポートセンター＞

〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

# 仕様

---

[目次へ↑](#)

品番	EVH-FC02
電源	DC5V/0.3A
消費電力	1.5W
充電電池	リチウムイオンポリマー電池 3.7V800mAh
充電時間(約)	4時間
満充電時の 合計使用可能時間(約)	3時間 (ABSORBモード・レベル最大時)
電源コード(約)	USBコード:350mm
モード切替	3種類 (CLEAN/ABSORB/MOISTURE)
防水性能	IPX5 (先端表面のみ)
本体サイズ(約)	53×54×160mm
本体重量(約)	132g
セット内容	本体、シートストッパー (本体装着済)、USBコード、EVOOCH美顔器専用シート×20枚、クイックスタートガイド、保証書

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。