


TOUCHBeauty

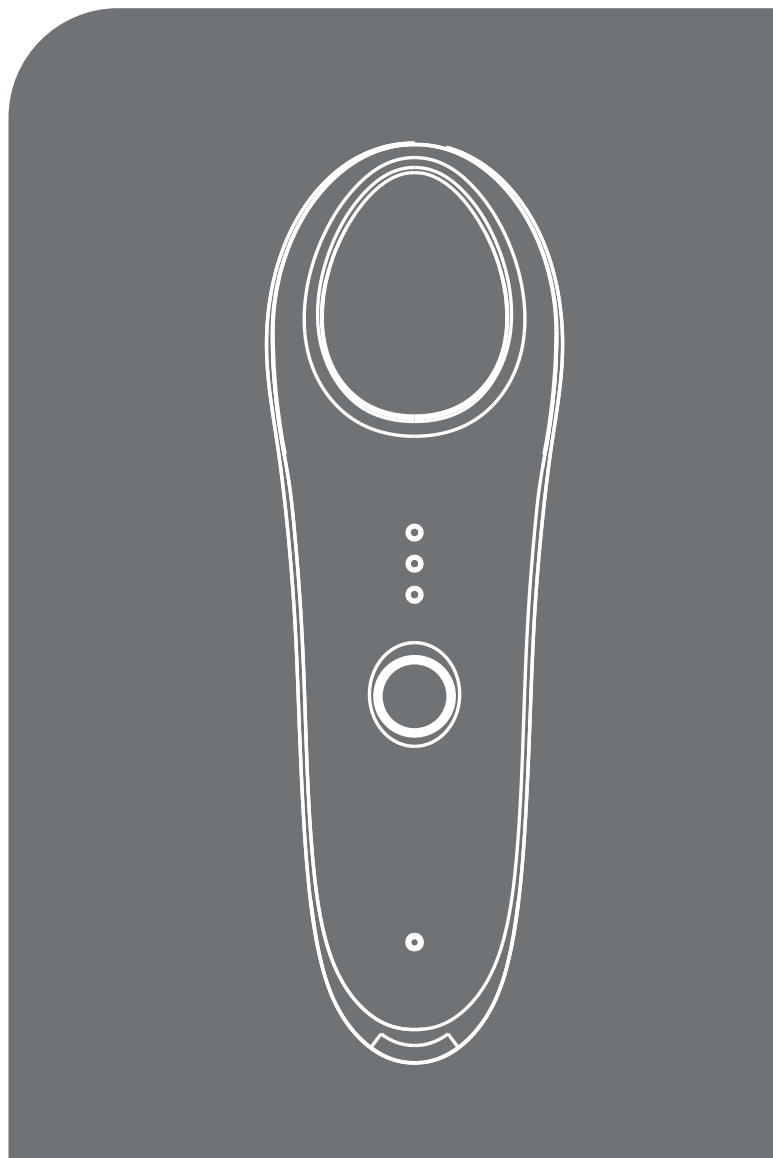

ホット&クールマルチ美顔器

TB-1389

取扱説明書

このたびは、TOUCHBeauty製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。

注意事項:

⚠ 警告

- ⦿ 本製品はお子様が使用すると、事故や怪我をするおそれがあります。お子様には使用させないでください。
- ⦿ 使用前に製品に破損や異常がないか確認してください。異常がある場合は使用しないでください。
- ⦿ 乾燥した環境で使用すると静電気が発生することがありますが、通常の物理現象ですので安心してご使用ください。
- ⦿ USB充電ケーブルおよび本体の充電ポートを乾燥した状態に保ってください。
充電中は使用しないでください。

⚠ 注意

- ⦿ 以下の方は本製品を使用しないでください：妊娠中または授乳中の方／アレルギー体質の方／顔面神経に異常のある方／顔面に骨折や整形による金属・シリコン・プラスチック等を埋め込んでいる方／顔に傷、ひび割れ、腫れなどがある方／重度の皮膚疾患をお持ちの方。
- ⦿ 以下の方（お子様を含む）は、他の成人の付き添いがない場合、本製品をご使用いただけません：身体機能や認知機能が低下している方、または製品の使用に関する知識や経験が不足している方。安全に使用するためには、責任者の監督または使用方法の指導が必要です。
- ⦿ 使用中に違和感や不快感を覚えた場合は、ただちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- ⦿ 本製品はお子様の手の届かない場所に保管してください。
- ⦿ 本体および付属品は定期的に清掃し、製品寿命を延ばしてください。
- ⦿ 衛生面の観点から、本製品を他人と共用しないでください。
- ⦿ 本製品を分解・修理・改造しないでください。事故や故障の原因になります。
- ⦿ ご使用前に髪を束ね、ネックレスやイヤリングなどのアクセサリは外してください。使用中に巻き込まれて怪我をする恐れがあります。
- ⦿ 本製品はリチウム電池を使用しています。湿気の多い場所や高温環境での長期保管は避けてください。
長期間使用しない場合は、充電してから保管してください。
- ⦿ 製品の廃棄時には火の中に入れてしないでください。
普通ごみと一緒に捨てないでください。各地域指定のごみ処理に従ってください。

各部のなまえ:

- | | |
|-----------|------------|
| ①電源ボタン | ⑥放熱口 |
| ②HOT表示灯 | ⑦充電ポート |
| ③COOL表示灯 | ⑧USB充電ケーブル |
| ④SONIC表示灯 | ⑨充電表示灯 |
| ⑤ヘッド | |

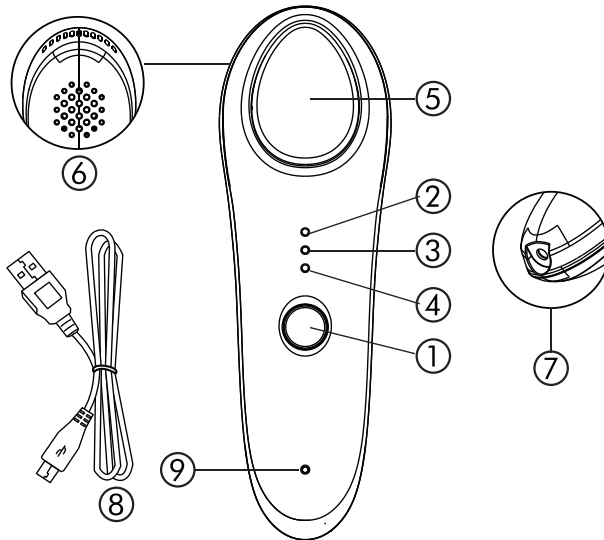


図 1

使用前の準備:

※本製品には初期状態で少量の電力が蓄えられていますが、初めてご使用になる前に、付属のUSBケーブルを使用して充電してください。

- 本製品の電源がオフになっていることを確認してください。

- 小型プラグを本体底部の充電ポートに差し込み、アダプターをコンセントに接続してください。

- 充電中は、充電表示ランプが赤く点灯します。満充電になると、ランプが青に変わります。充電時間の目安は約3時間です。

- フル充電後は、各モードを1回2分半使用した場合、約16回の使用が可能です。

注意：充電式電池の交換は絶対に行わないでください。

使用方法:

※ご使用前に、接触面に貼付されている保護フィルムをはがし、清潔で軽く湿らせた布で接触面を拭いてください。

1. モード切替

1) 温感モード: 電源ボタンを3秒間長押しすると電源が入り、同時にHOT表示ランプが点灯します。「ピッ」という音とともにマッサージヘッドが加熱を開始し、温感機能が作動します。(図2)

2) 温感+振動モード: 電源を入れた後(電源ボタンを3秒長押し)、再度電源ボタンを短く1回押すと、HOT表示ランプとSONIC表示ランプが同時に点灯し、温感+振動機能が作動します。(図3)

3) 冷感モード: 電源を入れた後(電源ボタンを3秒長押し)、HOT表示ランプが点灯、「ピッ」という音がした後に電源ボタンを2回素早く押すと、COOL表示ランプが点灯し、冷感機能が作動します。(図4)

4) 冷感+振動モード: 電源を入れた後(電源ボタンを3秒長押し)、さらに電源ボタンを3回押すと、COOL表示ランプとSONIC表示ランプが同時に点灯し、冷感+振動機能が作動します。(図5)

※各機能モードの動作時間は約2分半に設定されており、時間に達すると自動的に電源が切れます。また、使用中に電源ボタンを3秒間長押しすることで手動で電源をオフにすることも可能です。

※各モードは1回あたり約2分半の使用を目安として設計されています。お使いの化粧品が肌にしっかりと浸透・吸収されるまで、モードに従ってご使用いただくことをおすすめします。

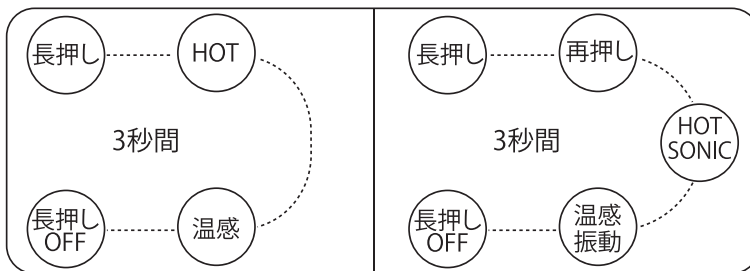


図 2

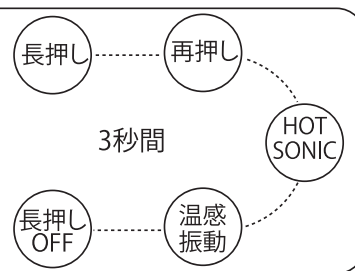


図 3

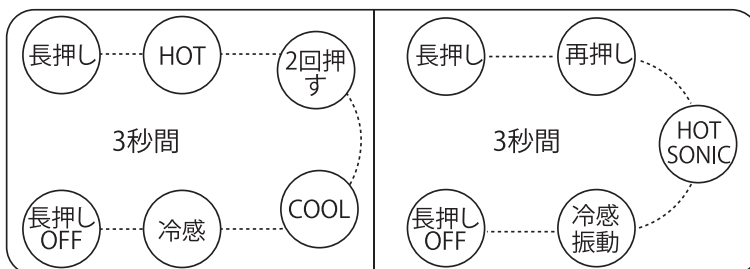


図 4

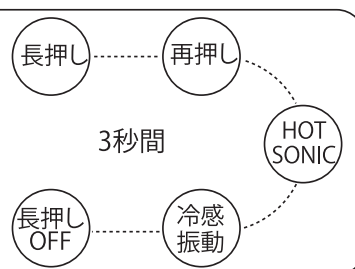


図 5

2. 日常使用のおすすめ

※1日2回のご使用を推奨いたします(朝・夜 各1回)。以下の手順に従ってご使用ください。

1) 朝: ご使用前に、まず顔全体を清潔にしてください。通常のスキンケアの前に、 $6^{\circ}\text{C} \pm 2$ の冷感モード／冷感＋振動モードを使用することで、目元や顔全体をすっきりさせることができます。または、洗顔後にスキンケア(例: アイクリーム、美容液、フェイスクリーム)を行った後に、 $6^{\circ}\text{C} \pm 2$ の冷感モード／冷感＋振動モードをご使用いただくことで、肌をすっきりと整えます。

2) 夜: ご使用前に顔を清潔にしてください。スキンケア製品を塗布した後、またはフェイスマスクを装着した状態で、 $42^{\circ}\text{C} \pm 2$ の温感モード／温感＋振動モードを使用することで、美容成分の浸透を促進します。その後、 $6^{\circ}\text{C} \pm 2$ の冷感モード／冷感＋振動モードを使用することで、「冷感＋振動」と「温感＋振動」を交互に使用することで、筋肉の緊張を和らげ、引き締まった印象の肌へと導きます。

※ご注意: 周囲の気温が 15°C 未満の場合は、冷感モード／冷感＋振動モードの使用はお控えください。身体に不快感を与える可能性があります。

2. 各モードの使用法

1) $42^{\circ}\text{C} \pm 2$ の温感モード／温感＋振動モードをスキンケア製品と併用する場合は、顔の左右両側に向かってやさしくリフトアップするように滑らせてください。(図6)

2) $6^{\circ}\text{C} \pm 2$ の冷感モード／冷感＋振動モード、または $42^{\circ}\text{C} \pm 2$ の温感モード／温感＋振動モードを単独で使用する場合は、肌に軽く当てるようにして、顔の各部位を30秒ずつケアしながら順に位置を移動させてください。(図7)

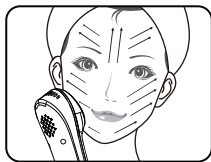


図 6

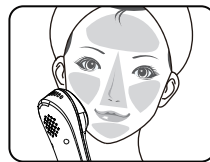


図 7

お手入れとメンテナンス:

※ご使用の前後には、常に本製品を清潔な状態に保つため、清潔で軽く湿らせた布で本体を拭いてください。(図8)

1) お手入れを始める前に、必ず電源がオフになっていることをご確認ください。

2) 本製品を水に浸して洗浄しないでください。(図9)

3) スチールたわし、研磨剤入りの洗剤、化学薬品または腐食性の液体などは絶対に使用しないでください。

- 4) 潤滑剤、洗剤、研磨剤、または芳香スプレー等を本製品に使用しないでください。
- 5) お手入れ後は、柔らかい布などで水分をよく拭き取ってください。

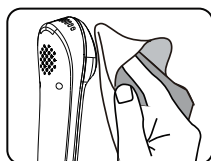


図 8

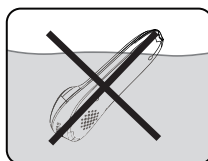


図 9

保管方法:

本製品にはリチウム電池が内蔵されています。高温多湿な環境での長期保管は避けてください。長期間使用しない場合は、バッテリー充電してから保管してください。

廃棄について:

本製品に内蔵されているバッテリーには、環境に有害な物質が含まれている場合があります。本製品を廃棄する際は、各自治体の指示に従って廃棄してください。

アフターサービス:

故障対処

発生状況	原因	対処方法
製品が正常に動作しない	バッテリー残量が少ないまたは空	取扱説明書に従って充電してください
使用終了後、ヘッドに余熱が残ることがあります	正常な現象	特別な対応は不要です
充電インジケータが点灯しない／消灯する	USB充電ケーブルが電源に接続されていない	USB充電ケーブルを正しく電源に接続してください
その他の不具合		製造元へお問い合わせください

注: 上記の方法をお試しいただいても製品が正常に動作しない場合は、すぐに使用を中止し、製造元にご相談ください

アフターサービスについて

1.保証書

本製品には保証書が付いています。お買い上げの販売店で「販売店名、お買い上げ日」などの記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご確認ください。

- 保証期間がすぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。

3.廃棄について

本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の回収方法をご確認の上、適当な処分を行ってください。

4.お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、製造元までご連絡ください。

保証書

品名	ホット&クールマ ルチ美顔器	型番	TB-1389
無料修理保証	対象部分：本体	期間	ご購入日より1年間
※販売者名	店名・住所・電話		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡してください。

本書は本書記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、ご購入の販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままの場合や、ご購入日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

《 無料修理規定 》

- 1.取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、ご購入の販売店が無料修理をうけたまわります。
- 2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、ご購入の販売店に依頼してください。
- 3.ご転居の場合は、ご購入の販売店にご相談ください。
- 4.ご贈答品で本書に記入してあるご購入の販売店に修理が依頼できない場合はTOUCHBeauty株式会社にご相談ください。
- 5.保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
 - A)使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - B)ご購入後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - C)火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - D)接続する他の機器の異常により生ずる故障および損傷。
 - E)電池や消耗品などの部品交換の場合。
 - F)一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障および損傷。
 - G)車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
 - H)ご購入後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
 - I)保証書のご提示がない場合。
 - J)保証書のご購入年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 6.保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

☆本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、ご購入の販売店にお問い合わせください。

☆ご使用による劣化・消耗および消耗品の交換は有料となります。

●利用目的

お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記載は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

●製品仕様

品名	ホット&クールマルチ美顔器
品番	TB-1389
入力電圧/電流	DC5V/1A
消費電力	6W
電源	充電式(リチウムイオン 電池: 3.7V 800mAh)
充電方式	Type-C
材質	ABS、亜鉛合金
寸法	約152 (W) × 48 (H) × 43 (D) mm
質量	114g
生産国	中国
セット内容	本体、USBコード、収納バッグ、 取扱説明書

製造元：TOUCHBeauty株式会社

住所：東京都台東区浅草橋5丁目12 - 2

TEL：03-4362-8880

MAIL : service@touchbeauty.co.jp