

TOUCHBeauty



電動角質リムーバー

TB-1536

取扱説明書

このたびは、TOUCHBeauty製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。

注意事項:

⚠ 警告

- 🚫 子供に使用させない、本製品で遊ばせない、ペットには使用しないてください。
- 🚫 使用前に製品に破損がないか、同梱物に不備がないかを確認してください。もし破損や不備等、お気づきの点がございましたら弊社までご連絡ください。
- 🚫 本製品はリチウムイオン電池を使用しているので、湿気や高温の環境下に長期間放置したり保存したりしないでください。
- 🚫 充電中に使用しないでください。
- 🚫 製品の廃棄時には火の中に入れてください。普通ごみと一緒に捨てないでください。各地域指定のごみ処理に従ってください。

⚠ 注意

- 🚫 以下の場合は、本製品を使用しないでください：
 - 皮膚部位に傷口、炎症、腫れ物がある場合。
 - アトピー体質の人、皮膚炎やアトピー性皮膚炎にかかっている方。
- 🚫 使用時に不快感や異常があった場合は、すぐに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- 🚫 定期的にお手入れをしてください。
- 🚫 他の人と一緒に製品を使用しないでください。本製品を分解、修理、改造をしないでください。

各部のなまえ:

- ① ローラーヘッド交換のボタン
- ② 本体
- ③ ローラーヘッド
- ④ スイッチ
- ⑤ 電源/充電/ロックの指示ランプ
- ⑥ Type-C充電口
- ⑦ 充電ケーブル

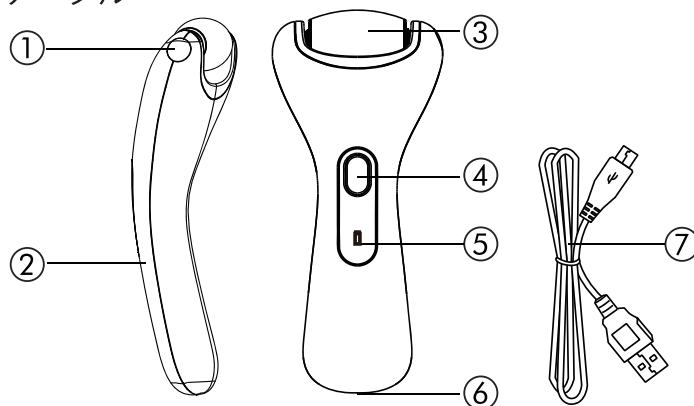


図 1

使用準備:

初めて使用する場合は、必ず充電してください。
本製品は電池容量不足になると、充電ランプが5回点滅して提示します。その時は直ちに充電してください。

使用方法

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

・ローラーヘッドの交換

取り外し：製品本体を片手で持ち、ローラーヘッド交換のボタンを片手で押すと、ローラーヘッドを引き抜くことができます。

取り付け：製品本体を片手で持ち、ローラーヘッドを片手で持ち、ローラーヘッドの四角い連結軸を本体の四角い穴に合わせ、さらに円形の連結軸を軽く押し込むことで取り付けができます。

注意：ローラーヘッドを取り付ける時は取付方向に注意して、収縮可能な連結軸とボタンを片側に取り付けてください。(図2)

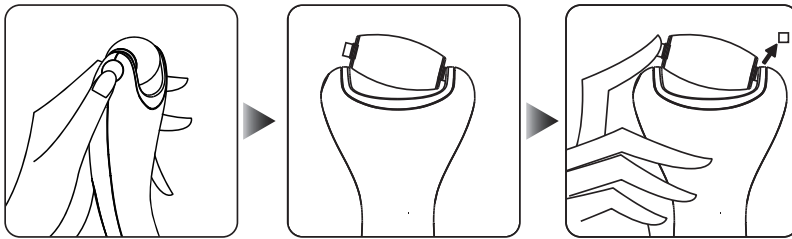


図 2

●ロック機能

ロック：電源を切った状態で、スイッチボタンを3秒間押し続け、LEDの赤と青が交互に3回点滅し、製品はロック状態に入ります。このとき、スイッチ操作では電源を入れません。

ロック解除：ロック状態で、スイッチボタンを3秒間押し続けると、ランプの赤と青が交互に3回点滅し、製品のロックが解除され、スイッチを短く押すと電源が入ります。

●ヘッド閉塞回転停止、回復

閉塞回転停止：ローラーヘッドの摩擦抵抗が一定値を超えると、製品内部の歯車の摩耗によるスリップ現象を防ぐために、製品は自動的に運転を停止します。

自動回復：摩擦抵抗を取り除き、約1秒待ち、ローラーヘッドは自動的に運転を再開します。

● 日常的な使い方

1) 電源を入れた後、電動足ケア機を足の磨きが必要な部位に軽く押して、ゆっくりと往復させます。(図 3)

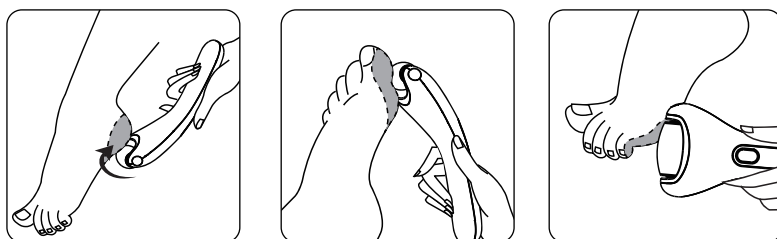


図 3

2) 使用が終わったら、スイッチを押して電源を切ります。足を拭いたり洗ったりして、残った角質を除去します。

お手入れと保管:

- 1) 本製品のお手入れ前に電源をお切りください。
- 2) 本体に落下、投げる等の衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 3) 本体の汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ります。
- 4) シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。変色と変形の原因になります。

5) 取り外し可能なローラーヘッドは水で洗い流すことができます。ワイヤボール、研磨性洗剤、化学薬品または腐食性液体を使用して洗淨しないでください。

保管

- 1) 幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 2) 本製品はリチウムイオン電池を使用しておりますので、高温・多湿の場所での使用、長時間の放置、保管はしないでください。発火の恐れがあります。
- 3) 本製品を長期間ご使用にならない場合は、半年毎に充電をして保管してください

アフターサービス:

故障かな?と思ったら

症状	チェックポイント	処置のしかた
製品が正常に作動しない	電量不足/電量切れ	取扱説明書に従って充電してください
電源が入らない	充電残量が少なくなっていない ませんか?	充電してから再度電源を入れてください
効果が薄い	ローラーが摩耗して いませんか? ローラーの取り付け が正しいですか?	ローラーを交換してください。 取扱説明書に従って ローラーの取り付け をご確認ください。
その他の異常・故障がある		製造元へお問い合わせください。

アフターサービスについて

1.保証書

本製品には保証書が付いています。お買い上げの販売店で「販売店名、お買い上げ日」などの記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご確認ください。

- 保証期間がすぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。

3.廃棄について

本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の回収方法をご確認の上、適当な処分を行ってください。

4.お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、製造元までご連絡ください。

保証書

品名	電動角質リムーバー	型番	TB-1536
無料修理保証	対象部分:本体	期間:ご購入日より1年間	
※販売者名	店名・住所・電話		

販売店様へのお願い必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡してください。
本書は本書記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。
上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、ご購入の販売店に修理をご依頼ください。
●所定記入欄が空欄のままの場合や、ご購入日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

≪ 無料修理規定 ≫

- 1.取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、ご購入の販売店が無料修理をうけたまわります。
- 2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、ご購入の販売店に依頼してください。
- 3.ご転居の場合は、ご購入の販売店にご相談ください。
- 4.ご贈答品で本書に記入してあるご購入の販売店に修理が依頼できない場合はTOUCHBeauty株式会社にご相談ください。
- 5.保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
 - A)使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - B)ご購入後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - C)火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - D)接続する他の機器の異常により生ずる故障および損傷。
 - E)電池や消耗品などの部品交換の場合。
 - F)一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障および損傷。

G)車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
H)ご購入後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
I)保証書のご提示がない場合。
J)保証書のご購入年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
6.保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

◇本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、ご購入の販売店にお問い合わせください。

◇ご使用による劣化・消耗および消耗品の交換は有料となります。

●利用目的

お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記載は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

●製品仕様

品名	電動角質リムーバー
品番	TB-1536
入力電圧/電流	DC5V/1A
消費電力	7.4W
電源	充電式(リチウムイオン電池: 3.7V 850mAh)
充電方式	Type-Cケーブル
材質	ABS
寸法	約75 (W) × 165 (H) × 40 (D) mm
質量	115g
生産国	中国

セット内容	本体、USBコード、収納バッグ、 取扱説明書
-------	---------------------------

製造元：TOUCHBeauty株式会社

住所：東京都台東区浅草橋5丁目12 - 2

TEL：03-4362-8880

MAIL : service@touchbeauty.co.jp