


TOUCHBeauty

TB-1662

マルチ目元ケア美顔器
取扱説明書

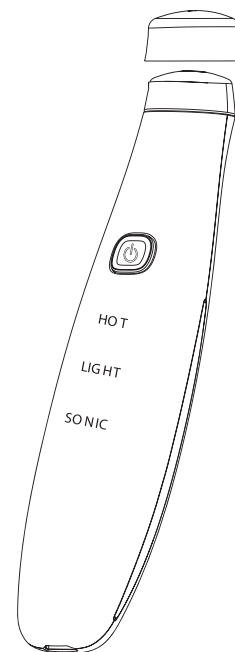

このたびは弊社の製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

安全上のご注意 TB-1662

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- ⚠ 危険 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じるものを示しています。
- ⚠ 警告 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるものを示しています。
- ⚠ 注意 誤った取扱いをしたときに、軽傷を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるものを示しています。

記号の例

- ⊘ 禁止「してはいけないこと」を示しています。
- ❗ 指示「必ずすること」を示しています。

⚠ 危険



下記のような電子機器をお使いの方は絶対に使用しない。

- ・ペースメーカーなどの体内植込み型医療用電子機器
- ・人工心肺などの生命維持用医療用電子機器
- ・心電計や点滴器などの装着型の医療用電子機器

(医療用電子機器や家庭用電気治療機器の誤作動、事故や体調不良をまねく恐れがあります)

⚠ 警告



- ・改造・修理はしない。

火災・感電・けがの原因となります。



- ・使用時間や頻度は、取扱説明書の指示を守ってください。
(過度な使用は、体に危害を与える原因となることがあります)

- ・次のような方は、医師に相談のうえ、使用する。
 - ・今までに重い病気をした人
 - ・悪性腫瘍のある人
 - ・糖尿病の人
 - ・ステロイド系ホルモン剤を長期間使用している人

!	• 肌の同じ箇所に続けて使用しないで動かしながら使用する。皮膚を痛める原因となります。 • 使用中に痛みや不調を感じたときや、使用後に肌に異常を感じたときは、使用を中止して専門医に相談する。事故・体調不良の原因となります。 • 異常、故障時には、直ちに使用を中止する。 火災・感電・けがの原因となります。 【異常・故障の例】本体、ACアダプター、コードが以下の状態になったとき。 変形、異常に熱くなる、こげ臭いにおいがする、使用中に異音がする。 →すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。 • ACアダプターやUSB充電コードは、根元まで確実に差し込む。 火災・感電の原因となります。 • 本体のお手入れをする際は、必ず電源をオフにする。 感電・けがの原因となります。
---	---

⚠ 注意	
⊘	• 顔のお手入れ以外の目的で使用しない。 事故やトラブルにつながる恐れがあります。 • 手に水分(化粧水・美容液・ジェルなど)がついたまま使用しない。 故障・けがの原因となります。 • 本来の使用方法以外の目的・用途に使用したり、人間以外に使用しない。 取扱説明書の内容以外に使用したときは、けがや故障の原因となります。 • 本体のヘッド部分を他の機器や電化製品に接触させない。 故障・けが・ほかの機器などに悪影響を及ぼす原因となります。



- 使用する前に、ヘッドに傷がないか確認する。 皮膚を傷つける原因となります。
- 充電時以外は、ACアダプターをコンセントから抜く。
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。
- 初めて使用するときはテストを行ってから使用する。
- 使いはじめの方や敏感肌の方は使用時間を短めにして、お肌の様子を見ながら使用する。
- 使用するときは、力をいれすぎないようにする。 肌荒れなどのトラブルの原因となります。
- イヤリング、ピアス、ネックレスなどのアクセサリー、コンタクトレンズは外して使用する。
事故やトラブルの原因となります。

本製品について

TB-1662

各部のなまえ(図1)

- | | |
|----------------|-----------------|
| ①キャップ | ⑥ライトモードインジケーター |
| ②赤色LEDライト | ⑦ソニックモードインジケーター |
| ③ヘッド | ⑧ソケット |
| ④電源ボタン | ⑨Type-C ケーブル |
| ⑤ホットモードインジケーター | |

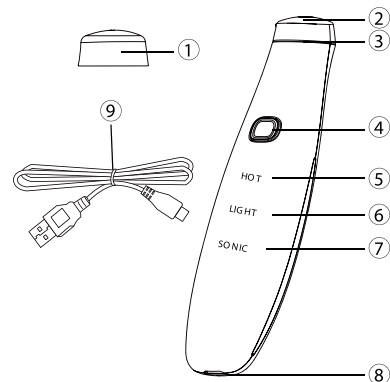


図1

🔌 充電する

- 本製品を初めて使用する場合や、長期間使用しなかった場合は、約3.5時間充電してください。
 - 充電はACアダプターまたはモバイルバッテリーを使用してください。
 - 充電するときは電源をオフにしてください。
1. 本体のソケットにUSB充電ケーブルを差し込みます。
 2. USB充電ケーブルをACアダプターまたはモバイルバッテリーと接続させます。
 3. 充電中はバッテリーインジケーターが赤色に点灯します。充電が完了すると青色に点灯します。
 4. 充電完了後、コンセントからACアダプターを抜き、本体ソケットからUSB充電ケーブルを取り外します。
- バッテリー残量低下アラーム；
 バッテリーの残量が少なくなると、バッテリーインジケーターが赤く点滅(約10回)して自動的に停止します。
 停止後に充電してください。

👤 使用する前に

1. 使用する前に洗顔を行い、メイクや皮脂などの汚れを落とします。
 2. 洗顔後のお肌に化粧水や美容液等を塗布します。
 3. お肌にニキビや吹出物で炎症を起こしていたり、異常がないか確認します。
- 炎症や異常がある場合は絶対に使用しないでください。

🚫 使用する

⚠ 注意



- 本製品は防水仕様ではありません。浴室や湿度の高い場所で使用しないでください。
 - サウナなどの高温になる場所で使用しないでください。
- 洗顔後に化粧水や美容液等を塗ってから使用してください。

1. 電源を入れる(図2)

電源ボタンを約3秒長押しすると、電源が入ります。

- ピッと動作確認音が鳴ります。
- 電源を入れるとホットモードが開始し、ホットモードインジケータが点灯します。

2. モードの切替

その後、電源ボタンを押して好きなモードに切替ができます。(切替時にピッと動作確認音が鳴ります)

• ホットモード

電源を入れるとホットモード(ヘッドが約40℃)になります。

ホットモードインジケータが点灯します。

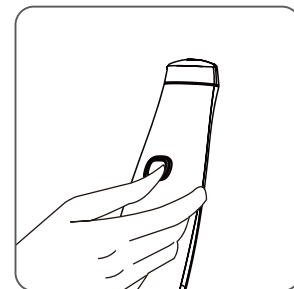


図2

- ライトモード


ホットモード選択中に電源ボタンを押すと、ライトモードになり赤色LEDが発光します。

ホットモードとライトモードが同時に使用でき、ホットモードインジケータとライトモードインジケータが点灯します。

- ソニックモード

ホットモードとライトモード選択中に電源ボタンを押すと、ソニックモードになり本体が振動します。

ホットモード、ライトモード、ソニックモードが同時に使用でき、ホットモードインジケータ、ライトモードインジケータ、ソニックモードインジケータが点灯します。

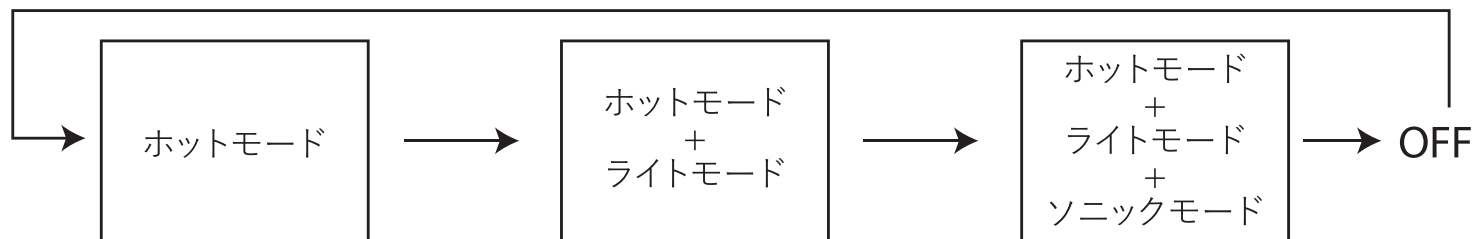

電源ボタンを押すと、上記の順にモードが切替わります。

3.お肌にあてて動かす(図3)

ヘッドを軽くお肌にあて、ゆっくりと滑らせます。

本製品は約5分で動作が停止します。

4.使用中の動作停止

電源ボタンを約3秒長押しすると電源が切れます。

使用後のお手入れ、保管

TB-1662

1.必ず電源が切れていることを確認してください。

2.本体、ヘッドの汚れをきれいに拭き取ります。

やわらかい布やティッシュなどを使用してください。

※ご注意

- 本製品は防水仕様ではないため、水洗いはできません。
- 洗剤、シンナー、ベンジン、アルコール、研磨剤などは絶対に使用しないでください。

3.お手入れをしたあとはキャップをつけて、以下の場所に保管してください。

- お子様の手の届かないところ
- 湿気やほこりの少ないところ
- 直射日光の当たらないところ

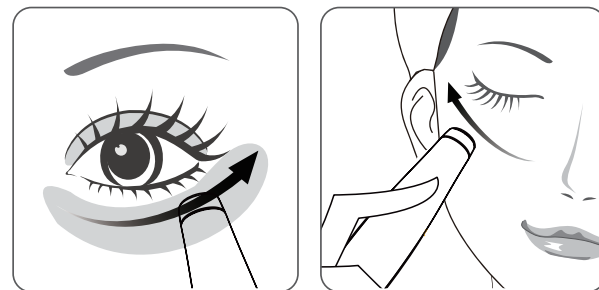


図3

アフターサービス

TB-1662

🔌 故障かなと思ったら

症状	確認事項	対応策
充電ができない	USB充電ケーブルが本体のソケット、またはACアダプターに正しく差し込まれていますか？	充電してから再度電源を入れてください。
	ACアダプターがコンセントから抜けていませんか？	ACアダプターをコンセントに確実に差し込んでください。
電源が入らない	充電できていますか？	約3.5時間充電してください。

👤 よくあるご質問

Q1.毎日使っても良いですか？

毎日ご使用いただけます。

連続使用を避ければ1日何度使用しても問題ありません。

Q2.専用の化粧水または美容液はありますか？

お手持ちの化粧水、美容液でご使用いただけます。

Q3.LEDライトを直接見ても大丈夫ですか？

ごくわずかな時間であれば直接見ても害はありませんが、一時的に視界が暗くなることがあります。
意図的にLEDライトを直接見たり、長時間直視しないでください。

Q4.メイクをしたまま使用できますか？

必ずメイクを落とした後にご使用ください。

Q5.お風呂で使ってもいいですか？

本製品は防水仕様ではないため、お風呂や湿気の多いところで使用しないでください。

アフターサービスについて

1.保証書

本製品には保証書が付いています。お買い上げの販売店で「販売店名、お買い上げ日」などの記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2.修理を依頼されるとき

•保証期間中は

商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご確認ください。

•保証期間がすぎている場合は。

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。

3.廃棄について

本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の廃棄方法をご確認の上、処分を行ってください。

4.お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、製造元までご連絡ください。

保証書

品名	マルチ目元ケア美顔器	型番	TB-1662
無料修理保証	対象部分：本体	期間：ご購入日より1年間	
※販売者名	店名・住所・電話		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡してください。

本書は本書記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、ご購入の販売店に修理をご依頼ください。

・所定記入欄が空欄のままの場合や、ご購入日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

・本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

《 無料修理規定 》

- | | |
|--|--|
| <p>1.取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、ご購入の販売店が無料修理をうけたまわります。</p> <p>2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、ご購入の販売店に依頼してください。</p> <p>3.ご転居の場合は、ご購入の販売店にご相談ください。</p> <p>4.ご贈答品で本書に記入してあるご購入の販売店に修理が依頼できない場合はTOUCHBeauty株式会社にご相談ください。</p> <p>5.保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。</p> <p>A)使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。</p> <p>B)ご購入後の転倒・落下などによる故障および損傷。</p> <p>C)火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧</p> | <p>による故障および損傷。</p> <p>D)接続する他の機器の異常により生ずる故障および損傷。</p> <p>E)電池や消耗品などの部品交換の場合。</p> <p>F)一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障および損傷。</p> <p>G)車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。</p> <p>H)ご購入後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。</p> <p>I)保証書のご提示がない場合。</p> <p>J)保証書のご購入年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。</p> <p>6.保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.</p> |
|--|--|

◇本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、ご購入の販売店にお問い合わせください。

◇ご使用による劣化・消耗および消耗品の交換は有料となります。

● 利用目的

お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
これらの記載は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

● 製品仕様

品名	マルチ目元ケア美顔器
品番	TB-1662
入力電圧/電流	DC5V/1A
消費電力	2.1W
電源	充電式(リチウムイオン電池: 3.7V 800mAh)
充電方式	Type-Cケーブル
材質	ABS、亜鉛合金
寸法	約136(W)×31(H)×23(D)mm
質量	約75g
生産国	中国

セット内容	本体、USBコード、収納バッグ、取扱説明書
-------	-----------------------

製造元：TOUCHBeauty株式会社

住所：東京都台東区浅草橋5丁目12-2

TEL：03-4362-8880

MAIL: service@touchbeauty.co.jp