


TOUCHBeauty

TB-1767

3-in-1マルチエステ
美顔器 プレミアム

取扱説明書

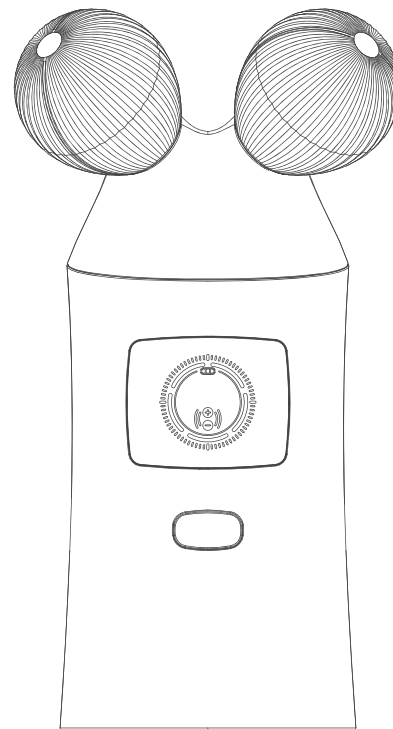

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。

注意事項

TB-1767

⚠ 警告

- 👁 本製品はおもちゃではありません。お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 👁 使用前に製品に破損や異常がないか確認してください。異常がある場合は使用しないでください。
- 👁 乾燥した環境で使用すると静電気が発生することがありますが、通常の物理現象ですので安心してご使用ください。
- 👁 USB充電ケーブルおよび本体の充電ポートを乾燥した状態に保ってください。
- 👁 充電中は使用しないでください。

⚠ 注意

- 👁 次のような方は本製品を使用しないでください：
 - ・妊娠中の方、子供、アレルギー体質の方。
 - ・皮膚疾患（白癬、やけど、熱傷、日焼けなど）、糖尿病、全身性エリテマトーデス、ポルフィリン症、うっ血性心不全、出血性疾患をお持ちの方、または免疫抑制の既往がある方（HIV感染またはエイズを含む）。
 - ・放射線治療または化学療法を受けている方。

🚫 以下のような方は、保護者または監督者の付き添いなしでは本製品を使用しないでください：身体機能または自身で意思表示できない方、または使用に必要な経験・知識を有していない方。安全のため、使用方法について指導・監督できる方の立ち会いが必要です。

🚫 次の部位への使用はお避けください：

- ・まぶた、のど、眼の周辺部位。
- ・脱毛処理を行った部位、整形手術を受けた部位。

🚫 以下のいずれかの薬を服用している場合、本製品を使用しないでください：

- ・ 現在または過去に α -ヒドロキシ酸(AHA)、 β -ヒドロキシ酸(BHA)、局所トレチノイン(レチノイン酸)、アゼライン酸による皮膚治療を受けている場合。
- ・ 過去6か月以内に経口または外用のAccutane(イソトレチノイン)またはRoaccutane(イソトレチノイン)を使用した場合。
- ・ 光感受性を引き起こす薬剤を服用している場合は、薬の説明書をご確認ください。「光アレルギー反応や光毒性反応の可能性がある」「服用中は日光を避けるべき」などの記載がある場合は、本製品を使用しないでください。
- ・ 抗凝固剤を服用している場合(大量のアスピリンを含む)。また、治療開始前に最低1週間は薬を中止できない場合も本製品の使用を避けてください。
- ・ 光に敏感な肌の方、光による発疹やアレルギー反応を起こしやすい方は、フォトスキンケアを使用しないでください。
- ・ 以下の症状がある部位には使用しないでください：感染症、湿疹やけど、毛囊炎(毛穴の炎症)、開いた傷や裂傷、擦り傷、単純ヘルペス、その他の皮膚疾患・病変・血腫。

- 👁️ 副作用が疑われる場合は、必ず専門医にご相談ください。
- 👁️ 同じ部位に対して、ブルーライトモードおよび複合光モードで長時間照射しないでください。製品からの案内音に従い、照射部位を適宜変更してください。
- 👁️ 初めてご使用になる場合は、必ず低レベルから使用を開始してください。
- 👁️ より快適で効果的な使用体験を得るために、フェイシャルヘッドおよびポイントヘッドを使用する際は、水溶性の美容ジェルを併用してください。
- 👁️ フォトスキンケアモード使用時は、光源を直接見ないでください。使用時は、サングラスまたは遮光アイマスク(別途ご用意ください)を着用し、光が直接目に当たらないようにしてください。
- 👁️ 本製品はお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 👁️ 製品の寿命を延ばすために、定期的なお手入れ・清掃を行ってください。
- 👁️ 衛生上の理由により、本製品を他人と共有しないでください。
- 👁️ 本製品を分解・改造・修理しないでください。また、他の目的には使用しないでください。
- 👁️ 本製品はリチウムイオン電池を使用しております。長期間にわたって湿気の多い場所や高温の環境に放置または保管しないでください。長期間ご使用にならない場合は、製品をフル充電した状態で保管してください。製品を廃棄する際は、火中に投げたり一般ごみとして処分したりせず、必ず各自治体の指示に従って廃棄してください。

本製品について

TB-1767

各部のなまえ(図1)

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| ① フェイシャルヘッド | ⑧ バッテリー表示灯 |
| ② ディスプレイ | ⑨ フォトフェイシャル
モード表示灯 |
| ③ 電源ボタン／モード
ボタン／レベルボタン | ⑩ レベル表示灯 |
| ④ 充電ポート | ⑪ マイクロカレント
モード表示灯 |
| ⑤ ポイントヘッド | ⑫ USB充電ケーブル |
| ⑥ フォトフェイシャルヘッド | ⑬ 収納袋 |
| ⑦ タイマー表示灯 | |

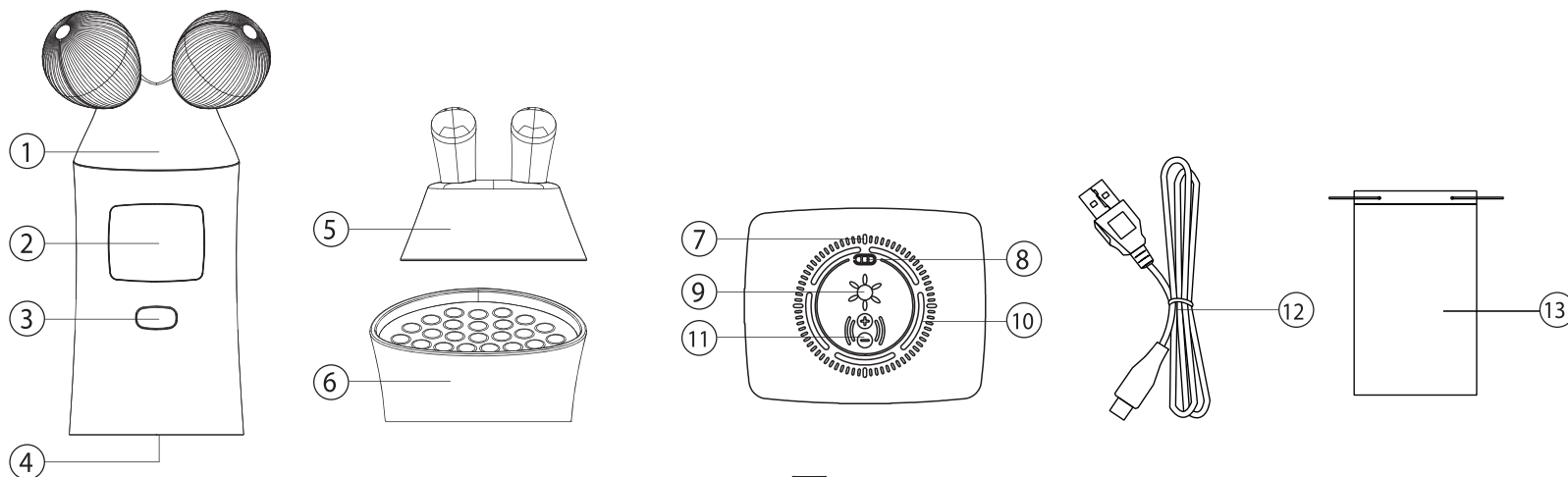


図1

使用前の準備

TB-1767

製品には出荷時にわずかな電力が残っていますが、正式にご使用になる前に、USB充電ケーブルを使用して充電してください。

本製品にはバッテリー残量低下の警告機能があります。バッテリー残量が少なくなると、バッテリーインジケーターが10秒間点滅した後、自動的に電源がオフになります。速やかに充電を行ってください。

充電:

- 本製品の電源がオフになっていることを確認してください。
- USB充電ケーブルを電源アダプターに接続し、ケーブルの小型プラグを本体底部のUSB充電ポートに差し込んでから、電源アダプターをコンセントに接続してください。
- 充電中は、バッテリーインジケーターが循環表示されます。満充電になると、バッテリーインジケーターがすべて点灯したままになります。フル充電には約3時間かかります。
- フル充電後は、約60分間連続使用できます。

※ご使用前に、肌を清潔にし、化粧品や皮脂、汚れをすべて取り除いてください。

※フォトフェイシャルヘッドをご使用の際は、必ず遮光アイマスクを着用し、光が目には直接当たらないようご注意ください。光が目に入ると、目を傷つけるおそれがあります。

使用方法

TB-1767

本製品を正しくご使用いただくために、ご使用前に以下の内容をよくお読みください。

👁ビューティーヘッドの取り外しおよび取り付け方法

- ・ 取り外し方法: 片方の手で本体をしっかりと持ち、もう一方の手でヘッドを持ち、ヘッドを矢印の方向に回転させながら、やさしく取り外してください(図2)。
- ・ 取り付け方法: 片方の手で本体をしっかりと持ち、もう一方の手でヘッドを持ち、接続部の位置を合わせて、軽く押し込みながら矢印の方向に回転させ、本体の外形と一致するまで取り付けてください(図3)。

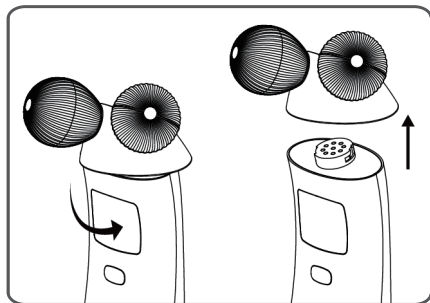


図2

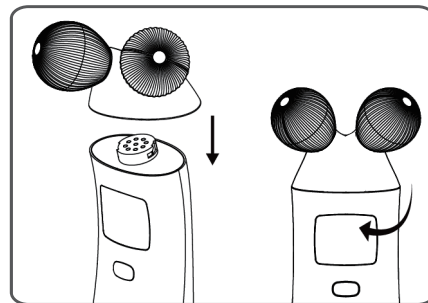


図3

👁フェイシャルヘッドの使用手順

※本ヘッドのマイクロカレントモードは5段階のレベルがあり、ニーズに応じた出力レベルをお選びいただけます。

※ご使用の際は、製品と肌の接触角度を調節してください(図4)

※動作時間は6分間で、2分ごとに「ピピッ」という音でエリアの切り替えをお知らせします。

- ・ フェイシャルヘッドを説明書に従って正しく取り付けてください。
- ・ 使用する部位にお手持ちのジェルまたは美容液を塗布してください。

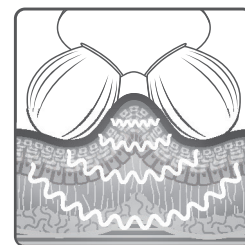


図4

・電源／モード／レベルボタンを長押しして電源を入れ、再度短く押すことでマイクロカレントの出力レベルを調節できます。初めてご使用になる場合は、低レベルからの使用をおすすめします。

顔の部位	ケア手順	推奨使用時間
 頬	ヘッドをあごのラインから頬骨に向かって、または口元から耳の方向へやさしく滑らせてください。	左右それぞれ2分間
 おでこ	目を閉じて、眉の上から髪の毛の生え際に向かって、やさしくヘッドを滑らせてください。	額全体で約2分間

・マイクロカレントは肌の状態に応じて使用頻度を調節してください。1回の使用時間は6分以内を推奨します。

👁️ ポイントヘッドの使用手順

※マイクロカレントは3段階の出力レベルがあり、ニーズに応じて選択できます。

※電源／モード／レベルボタンを短押しすることで、マイクロカレントの出力レベルを調節でき、さまざまな使用感をお楽しみいただけます。初めて使用する際は、必ず低レベルからお試ください。

※動作時間は3分間で、1分ごとに「ピピッ」という音でケアする部位の切り替えをお知らせします。

- ・ポイントヘッドを説明書に従って正しく取り付けてください。
- ・使用部位にお手持ちのジェルまたは美容液を塗布してください。
- ・電源／モード／レベルボタンを長押しして電源を入れ、さらに短押しすることでマイクロカレントの強度を調整します。初回使用者は低レベルからご使用ください。

顔の部位	ケア手順	推奨使用時間
 口元	ポイントヘッドを口角から耳の方向へ滑らせ、これを3回繰り返します。	1回の時間は約1分間
 目元	ポイントヘッドを目の周りの肌にやさしく密着させ、目頭の下からこめかみに向かってゆっくり滑らせるか、点で押すように使用してください。これを3回繰り返します。	左右それぞれ約1分間

- ・マイクロカレントは肌の状態に応じて使用頻度を調節してください。1回の使用時間は3分を推奨します。


🕒 フォトフェイシャルヘッドの使用手順

※使用前に、肌が光過敏でないかをテストしてください：光照射ヘッドを腕の内側に3分間あててください。3分後にその部分が赤くなり、さらに2時間以上赤みが引かない場合は、光過敏の可能性があるので、本製品のフォトフェイシャルヘッドは使用しないでください。

※光照射機能を使用する際は、必ずお手持ちのサングラスや遮光アイマスク等を着用し、光が直接目に入らないようにしてください。光が目に入ると、目に損傷を与える可能性があります。

※フォトフェイシャル機能は、必ず肌に密着させた状態で使用してください。

- ・説明書に従って、フォトフェイシャルヘッドを正しく取り付けてください。
- ・電源／モード／レベルボタンを長押しして電源を入れ、再度短押しして、希望するフォトモードに切り替えてください。

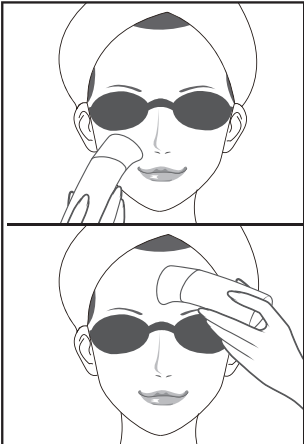	モード	効果	推奨使用時間
	レッドライトLED	肌のコンディションを整え、ハリとツヤのある若々しい印象へ	約6分間(2分ごとに光照射エリアを切替)
	イエローライトLED	肌にやさしくアプローチし、明るく均一な肌トーンへ	約6分間(2分ごとに光照射エリアを切替)
	ブルーライトLED	肌を清潔に保ち皮脂バランスを整えることで肌荒れを防ぐ	約3分間(1分ごとに光照射エリアを切替)

	ミックス光	3色LEDライトによる多角的なスキンケア	約6分間(2分ごとに光照射エリアを切替)
--	-------	----------------------	----------------------

・お肌の状態やニーズに合わせて光モードを切り替えてください。過度な光トリートメントは避け、週に2～3回のご使用を推奨します。また、必ず推奨される使用時間を守ってください。お手入れが完了したら、通常のスキンケアステップに従って保湿などのケアを行ってください。

お手入れとメンテナンス TB-1767

※ご使用の前後には、製品本体およびヘッドを清潔な湿らせた柔らかい布で拭き取り、常に最良の性能を保つようにしてください。

- ・お手入れを始める前に、必ず製品の電源がオフになっていることを確認してください。
- ・本製品を水に浸して洗浄しないでください。
- ・スチールウール、研磨性の洗剤、化学薬品、または腐食性の液体などで本製品を清掃しないでください。
- ・潤滑剤、洗剤、研磨剤、芳香剤などを本製品に使用しないでください。

保管方法 TB-1767

本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されています。高温多湿な環境での長期保管は避けてください。長期間使用しない場合は、バッテリーを満充電の状態にしてから保管してください。

廃棄について

TB-1767

本製品に内蔵されているバッテリーには、環境に有害な物質が含まれている場合があります。本製品を廃棄する際は、家庭ゴミとして処分せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。

アフターサービス

TB-1767

※故障対処

発生状況	原因	対処方法
製品が正常に動作しない	ヘッドの取り付けが正しくない	取扱説明書の指示に従ってヘッドを交換してください
	バッテリー残量が少ないまたは無い	取扱説明書に従って充電してください
マイクロカレントの体感が弱い	出力レベルが低い	取扱説明書に従ってレベルを調節してください
	肌が乾燥している	保湿を行ってからご使用ください
その他の不具合		製造元にお問い合わせください
注：上記の方法をお試しいただいても製品が正常に動作しない場合は、すぐに使用を中止し、製造元にご相談ください		

アフターサービスについて

1.保証書

本製品には保証書が付いています。お買い上げの販売店で「販売店名、お買い上げ日」などの記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご確認ください。

- 保証期間がすぎている場合は

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。

3.廃棄について

本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の廃棄方法をご確認の上、処分を行ってください。

4.お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、製造元までご連絡ください。

保証書

品名	3-in-1 マルチエステ美顔器 プレミアム	型番	TB-1767
無料修理保証	対象部分：本体	期間	ご購入日より1年間
※販売者名	店名・住所・電話		

販売店様へのお願い必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡してください。

本書は本書記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、ご購入の販売店に修理をご依頼ください。

・所定記入欄が空欄のままの場合や、ご購入日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

・本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

《 無料修理規定 》

- 1.取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、ご購入の販売店が無料修理をうけたまわります。
- 2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、ご購入の販売店に依頼してください。
- 3.ご転居の場合は、ご購入の販売店にご相談ください。

4.ご贈答品で本書に記入してあるご購入の販売店に修理が依頼できない場合は TOUCHBeauty 株式会社にご相談ください。

5.保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。

A)使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。

B)ご購入後の転倒・落下などによる故障および損傷。

C)火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。

D)接続する他の機器の異常により生ずる故障および損傷。

E)電池や消耗品などの部品交換の場合。

F)一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障および損傷。

G)車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。

H)ご購入後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。

I)保証書のご提示がない場合。

J)保証書のご購入年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

6.保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

☆ 本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、ご購入の販売店にお問い合わせください。

☆ ご使用による劣化・消耗および消耗品の交換は有料となります。

- 利用目的

お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記載は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

- 製品仕様

品名	3-in-1マルチエステ美顔器 プレミアム
品番	TB-1767
入力電圧/電流	DC5V/0.5A
消費電力	1.72W
電源	充電式(リチウムイオン電池: 3.7V 800mAh)
充電方式	Type-Cケーブル
材質	ABS、PC、ステンレス鋼
寸法	約76(W)×59(H)×136(D)mm
質量	266g
生産国	中国
セット内容	本体、フェイシャルヘッド、ポイントヘッド、フォトフェイシャルヘッド、USBコード、収納バッグ、取扱説明書

製造元: TOUCHBeauty株式会社
住所 : 東京都台東区浅草橋5丁目12-2
TEL : 03-4362-8880
MAIL: service@touchbeauty.co.jp