


TOUCHBeauty

TB-1796

RFボディケアリフト プレミアム
取扱説明書

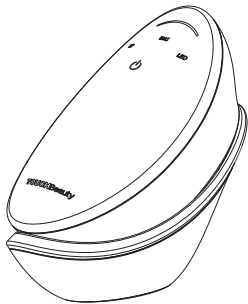

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。

注意事項

TB-1796

⚠ 警告

- ⦿ この製品はおもちゃではありません。お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ⦿ ご使用前に、製品に破損や破損がないか確認してください。発生した場合は使用しないでください。
- ⦿ 乾燥した環境で使用すると、製品に触れると静電気が発生する可能性があります。これは日常の物理現象ですので、安心して使用してください。
- ⦿ USB充電ケーブルとベース充電口を乾燥させたままにしてください。
- ⦿ 充電中には使用しないでください。

⚠ 注意

- ⦿ 以下の状況に該当する方は、本製品を使用しないでください：
 - 妊婦、授乳者及び児童、電子医療機器を装着している方、アレルギー体質方。
 - 皮膚疾患(瘡、乾癬、湿疹、皮疹、火傷、日焼け、異常な傷口癒合など)。
 - 糖尿病、エリテマトーデス、ポルフィリン症または充血性心臓病、出血症を患っている方、免疫抑制病歴のある方(エイズ感染またはエイズ患者)。

- 心臓ペースメーカーまたは内部除細動器が設置され、心拍数異常または他の既知の重篤な心臓病を患っている方。
- 使用範囲内に金属インプラントがあり、穴を開けて飾りがあり、いかなる形の不審な病変がある方。
- 放射線治療または化学療法を受けた者。
- 熱刺激による病気、例えば再発性単純ヘルペスウイルス。

☹ 以下の薬を服用している場合は、本製品を使用しないでください：

- 皮膚は α -ヒドロキシ酸(AHAS)を受けていたり、 β -ヒドロキシ酸(BAHs)、局所異次元A酸及びアゼライン酸による治療。
- 過去半年間(6ヶ月)にAccutaneA酸またはRoaccutaneA酸を経口または外用したことがある方。
- 光増感剤または薬物の服用については、薬箱内の説明を参照してください。もし表示が光アレルギー反応を起こす可能性がある場合、光毒性反応または服薬後の日光照射を避けるべきなどの説明がある場合、本製品を使用しないでください。
- 抗凝血薬を服用している方、アスピリンを大量に使用しており、その投与程度は治療期間の少なくとも1週間前に中止することができない方。

☹ 本製品は腕、腰腹と臀部などの身体部位に適用され、まぶた、唇、胸部、性器領域、3ヶ月以内の整形部位、喉の部位に使用しないでください。

☹ 皮膚が光に敏感で、赤疹やアレルギー反応が起こりやすい方は、フットンケアを使用しないでください。

☹ 光美容ヘッドを使用するときは光源を直視しないでください。使用するときはサングラスや遮光アイマスク(自分準備)を着用して、光源が目には直射しないようにすることをお勧めします。

☹ 勝手に修理したり、分解したり、改造したりしないでください。本製品を他の用途に使用しないでください。

☹ 潜在的な副作用に疑いがある場合は、専門医に相談してください。

- 本製品は、お手持ちのボディ用ジェルや美容ジェルなどを塗布してご使用ください。
- 子供の手が届かないところに製品を置いてください。
- 定期的に本体や付属品をクリーニングして、寿命を延ばしてください。
- 他の人と同じ製品を共有しないでください。
- 事故が発生しないように、自分で分解したり、修理したり、改造したりしないでください。
- 本製品はリチウム電池を使用しているので、本製品を湿気や高温の環境下に長期間放置したり保存したりしないでください。長時間使用しない場合は、製品を充電して保存してください。製品の廃棄時には火の中に入れてください。普通ごみと一緒に処理しないでください。政府指定のごみ箱に捨ててください。

本製品について

TB-1796

● 各部のなまえ(図1)

- | | |
|------------|------------|
| ①RF電極ヘッド | ⑦ライト照射区域 |
| ②電源スイッチ | ⑧ベース |
| ③RF機能スイッチ | ⑨ベース充電口 |
| ④EMS機能スイッチ | ⑩USB充電コード |
| ⑤LED機能スイッチ | ⑪クリーニングクロス |
| ⑥ギア調節スイッチ | ⑫収納袋 |

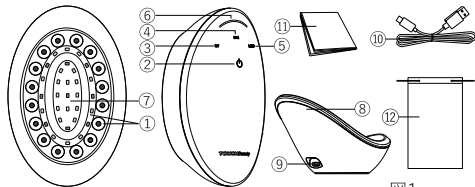


図1

使用前の準備

TB-1796

充電

・本製品は無線充電システムを使用しています。本体をベースに置いて、USBケーブルをアダプタに挿入して、もう一方のType-Cインタフェースを無線充電ベースにセットしてください。充電中はモードランプが点滅します。充電が完了すると点灯に変わります。(図2)

・本体の表示に従って本機械を充電してください(アダプター出力:5 V/2.0 A)。機器の充電時間は約 5 時間です。充電後は約30分使用できます。

・低圧時に現在のモードランプと機能ランプが5回フラッシュした後、機械は自動的に電源が切れます。

・充電中は動作しません。

注意:充電式バッテリーを交換しないでください。

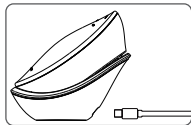


図2

操作方法


TB-1796

・電源スイッチ:ダブルタッチで起動し、起動のデフォルトではいかなる機能もオンになっていません。この時、3つの機能(RF/EMS/LED)のランプの輝度は半点灯で、調節スイッチは消灯し、何の操作もない場合、1分でオフになり、起動後、ダブルタッチすると、直ちにオフになります。

・RF機能スイッチ:スタートとオフをダブルタッチで、デフォルトのギアは1ギアで、合計6ギアの出力レベルを調節することができます。

- EMS機能スイッチ：ダブルタッチで起動と停止、デフォルトレベルは1で、合計6レベルの出力レベルを調節することができます。
- LED機能スイッチ：スタートとオフをダブルタッチします。
- ギア調節スイッチ：右にスライドするたびに1レベル上がり、左にスライドするたびに1レベル下がり、合計6レベルの調節ができます。

ケア時間

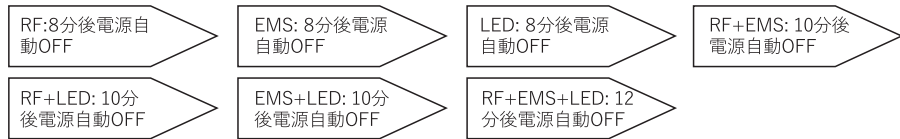

使用方法

TB-1796

製品を正しくご使用いただけるよう、使用前に以下の事項をよく読んでください。

- 使用する前に肌を清潔にして、すべての油脂と汚れを取り除いてください。
- 製品を使用するときは、光源が目照射されないようにライト照射区域を直視しないでください。目に損傷を与える可能性があります。
- イヤリング、指輪、ネックレスなど、アクセサリーをすべて外します。
- ジェルの塗布方法：お手持ちの適量のジェルまたはスキンケアジェル/乳液を本体に塗布してください。その後ヘッドを使用箇所置き、中心から外側に向かって均一にゆっくり円を描きながら動かします。(図3)
- 製品の電源を入れて、RF機能モードを選択し、使用箇所ですくろり円を描くと、肌を最適な温度で加熱します。(図4)
- 温度が低いと感じたら、使用範囲を小さくして、移動速度を下げます。温度が高すぎる場合は、使用範囲を大きくして移動速度を大きくし、快適な温度に調節できます。使用時、モードの半分の時間が経過すると、提示音で移動のタイミングをお知らせします。(図5)



図3



図4



図5

・別の箇所にあてるときは、再び適量のジェルまたはスキンケアジェル/乳液を本体に塗布し、上記の手順を繰り返して使用します。

・使用が終わったら、お好みで肌のジェルをオフし、通常使用しているスキンケア用品を塗って、ケアをしてください。

👁️ 使用位置

・腕のケア手順

肘から肩まで腕の内側、外側を4～6分かけてケアしてください。(図6)

・ウエストケア手順

おへそを避け、押し当てるように上下に3～4分間ケアしてください。(図7)

おへその周辺は円を描くように3～4分間ケアしてください。(図8)

腰から下腹部にかけて下向きに3～4分間ケアしてください。(図9)

・臀部ケア手順

尾てい骨を避け、押し当てるように上下に3～4分間ケアしてください。(図10)

お尻の下から腰に向かって尾てい骨を避け、上向きに3～4分間ケアしてください。(図11)

お尻の横から中心に向かって尾てい骨を避け、3～4分間ケアしてください。(図12)

・足のケア手順

膝の上で太ももの正面を上3～4分間ケアしてください。(図13)

膝の上で太ももの側面を上3～4分間ケアしてください。(図13)

ふくらはぎ周辺を3～4分間ケアしてください。(図15)



図6



図7



図8



図9

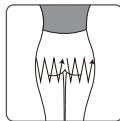


図10

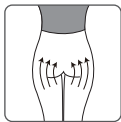


図11



図12



図13



図14

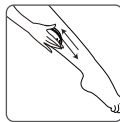


図15

● 使用頻度

ご自身のニーズに合わせて2つ以上の組み合わせで使用することをお勧めします。同じ部位のケアには、少なくとも1日間隔で行ってください。

週に2～3回使用することを勧めます。少なくとも6～8週間連続使用してから、お肌の調子に合わせて使用してください。



注意

- ・初回使用は24時間前にパッチテストを行い、お手持ちのジェルまたはスキンケアジェル/乳液を腕の内側に塗布し、ジェルまたはスキンケアエッセンスでアレルギー反応が起こらないか確認してください。
- ・24時間前に、お手持ちのジェルやスキンケアエッセンスを使用して、腕の内側でテストしてください(8分)。皮膚は赤くなったり軽く腫れたりする場合がありますが、すぐに消えます。24時間以上消えない場合は、専門医に相談してください。
- ・長時間の使用は避けてください。
- ・肌の特性や感覚は人によっても位置によっても異なり、感じ方は個人差によって異なります。
- ・使用中は同じ箇所にあて続けしないでください。やけどをするおそれがあります。

使用後のお手入れ、保管

TB-1796

- ・クリーニングを開始する前に、製品の電源がオフになっていることを確認します。
- ・使用後は、ヘッドと本体を速やかに洗浄してください。本体の防水レベルはIPX 6で、浴室で使用できますが、直接水で洗浄することはできません。洗浄後はウェットティッシュやクリーニングクロスで拭くことをお勧めします。
- ・ワイヤボール、研磨性洗浄剤、化学薬品または腐食性液体を使用して製品を洗浄しないでください。
- ・長期間使用しない場合、半年に一度充電してください。

※故障かなと思ったら

症状	確認事項	対応策
動かない	バッテリーが切れていませんか？	取扱説明書を参照して充電してください
	電量が不足していませんか？	
熱さと微電流を感じない	ジェルなどの量が足りていますか？	適量のジェルまたはスキンケアジェルを塗布してください
	速く動かしすぎていませんか？	ゆっくり動かしてください
	電源は入っていますか？	電源を入れてください
その他		製造元に連絡をお願いします

アフターサービスについて

1.保証書

本製品には保証書が付いています。お買い上げの販売店で「販売店名、お買い上げ日」などの記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2.修理を依頼されるとき

・保証期間中は

商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご確認ください。

・保証期間がすぎている場合は

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。

3.廃棄について

本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の廃棄方法をご確認の上、適当な処分を行ってください。

4.お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、製造元までご連絡ください。

保証書

品名	RFボディケアリフトプレミアム	型番	TB-1796
無料修理保証	対象部分:本体	期間:	ご購入日より1年間
※販売者名	店名・住所・電話		

販売店様へのお願い必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡してください。

本書は本書記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、ご購入の販売店に修理をご依頼ください。

・ 所定記入欄が空欄のままの場合や、ご購入日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

・ 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

《 無料修理規定 》

1.取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、ご購入の販売店が無料修理をうけたまわります。

2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、ご購入の販売店に依頼してください。

3.ご転居の場合は、ご購入の販売店にご相談ください。

4.ご贈答品で本書に記入してあるご購入の販売店に修理が依頼できない場合はTOUCHBeauty 株式会社にご相談ください。

5.保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。

A)使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。

B)ご購入後の転倒・落下などによる故障および損傷。

C)火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
D)接続する他の機器の異常により生ずる故障および損傷。
E)電池や消耗品などの部品交換の場合。
F)一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障および損傷。
G)車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。

H)ご購入後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。

I)保証書のご提示がない場合。

J)保証書のご購入年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

6.保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

◇ 本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、ご購入の販売店にお問い合わせください。

◇ ご使用による劣化・消耗および消耗品の交換は有料となります。

・利用目的

お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記載は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

•製品仕様

品名	RFボディケアリフト プレミアム
品番	TB-1796
入力電圧/電流	DC5V/1A
消費電力	10W
電源	充電式(リチウムイオン電池: 7.4V 1000mAh)
充電方式	Type-Cケーブル
材質	ABS、PC、ステンレス、亜鉛合金
寸法	約122(W)×80(H)×50(D)mm
質量	380g
生産国	中国
セット内容	本体、USBコード、収納バッグ、充電スタンド、クロス、取扱説明書

製造元: TOUCHBeauty株式会社
 住所: 東京都台東区浅草橋5丁目12-2
 TEL: 03-4362-8880
 MAIL: service@touchbeauty.co.jp