

TOUCHBeauty

TB-2187

CANC マルチエステ美顔器
取扱説明書



このたびは弊社の製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

取り扱い上のご注意 TB-2187

⚠ 警告

- 本製品はおもちゃではありません、お子様子の手の届かない場所に保管してください。
- ご使用前に必ず商品に破損がないかご確認ください。
- 差込口やUSBケーブルを濡らさないようにご注意ください。

⚠ ご注意

- 使用不可の疾患：
 - 妊娠中、授乳中、月経中の女性と子供。
 - 光に敏感、発疹やアレルギー反応を起こしやすい皮膚タイプ。
 - 現在皮膚病の治療を受けている方および以前に皮膚病歴を持つ方。
 - 皮膚の初期病変またはいくつかの非定型母斑(ほくろ)がある方。

- 点灯中は照射光を直視したり、目に当てない。
- 感染症、湿疹、火傷、炎症を起こした毛包、裂け目、擦り傷、単純ヘルペス、創傷または病変、および血腫がある方。
- ケロイド形成や創傷治癒不良などのコラーゲン障害の病歴がある方。
- 糖尿病、エリテマトーデス、ポルフィリン症、充血性心疾患、出血性疾患の患者。
- 過去6ヵ月以内にヒドロキシ酸、ビーハス、イソトレチノイン外用薬、アゼライン酸による治療を受けている、または受けたことがある方。
- ペースメーカーや除細動器を装着している方、不整脈を患っている方、その他既知の重篤な心臓病を患っている方。
- 頬、額、顎のみの部位を使ってください。まぶた、唇、胸およびビキニラインや脱毛と整形したことある部位を避けてください。。
- ⦿ 本製品を分解、修理、改造しないでください。事故の原因となります。
- ⦿ 本製品を湿気の多い場所や高温の場所に長時間置いたり、保管したりしないでください。 長期間使用しない場合は、室温で乾燥した場所に保管してください。

- ⦿ご不快な場合は、本製品の使用を中止し、医師にご相談ください。
- ⦿ジェルを併せて使用するのがおすすめです。

各部のなまえとはたらき

TB-2187

- | | |
|-------------|-------------|
| ① 本体 | ⑩ 電源スイッチ |
| ② 充電ベース | ⑪ レベル切替ボタン |
| ③ 充電ケーブル | ⑫ CANC表示ランプ |
| ④ クリーニングクロス | ⑬ モード表示ランプ |
| ⑤ 収納袋 | ⑭ レベル表示ランプ |
| ⑥ 取扱説明書 | ⑮ 放熱口 |
| ⑦ 顔用ヘッド | ⑯ 接触スイッチ |
| ⑧ 目元用ヘッド | ⑰ 充電ソケット |
| ⑨ コットン固定リング | |

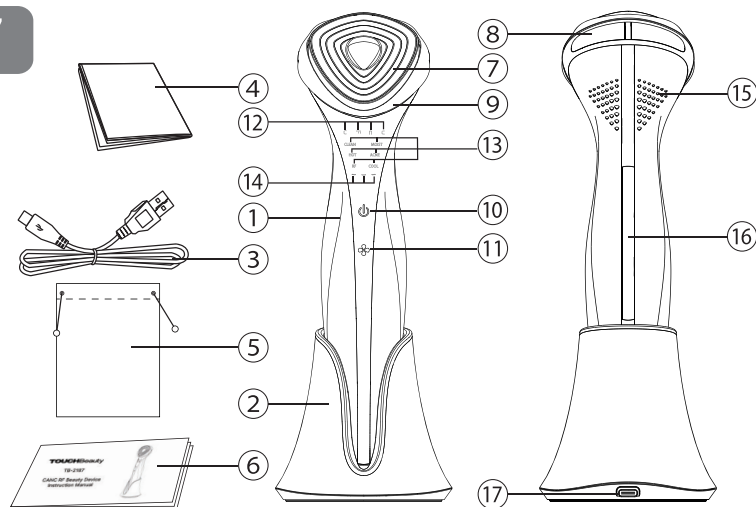


図 1

使用前の準備

TB-2187

初めは、満充電されていませんので充電してからご使用ください。

🔌 充電について

1) 本製品はワイヤレス充電システムがあります。充電前に、充電スタンドと充電ケーブルおよびアダプターを接続してください。(アダプター付属しません。5V $\equiv$ /2A以上のアダプターを使ってください。) 本体を充電ベースに置くと充電します。(図2)

2) 充電中、レベル表示ランプが点滅、充電完了すると点灯します。(図3)

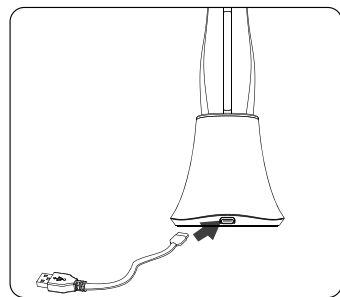


図 2

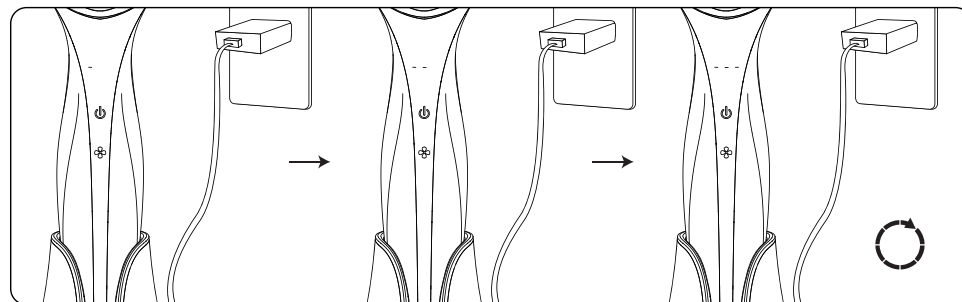
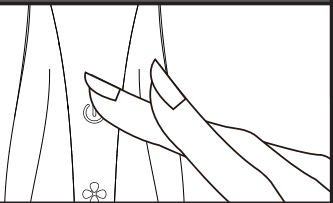
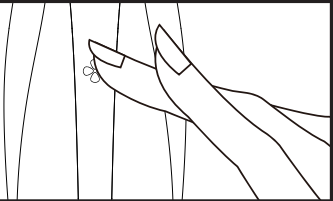


図 3

- 3) フル充電は約6時間、1回のフル充電で約60分使用できます。
- 4) 残量不足になるとライトが5回点滅して停止します。再度充電を行ってください。

👁 各モードと使いかた

スイッチ	特徴	使い方	機能
電源スイッチ		長押し	電源ON／OFF
		短押し	モード切替
レベルスイッチ		短押し	レベル切替

- モード切替はクリーニング→温熱→RF→マイナスイオン→LEDライト→クールの順番で繰り返され、各モードに切替わると対応するランプが点灯します。(図4)

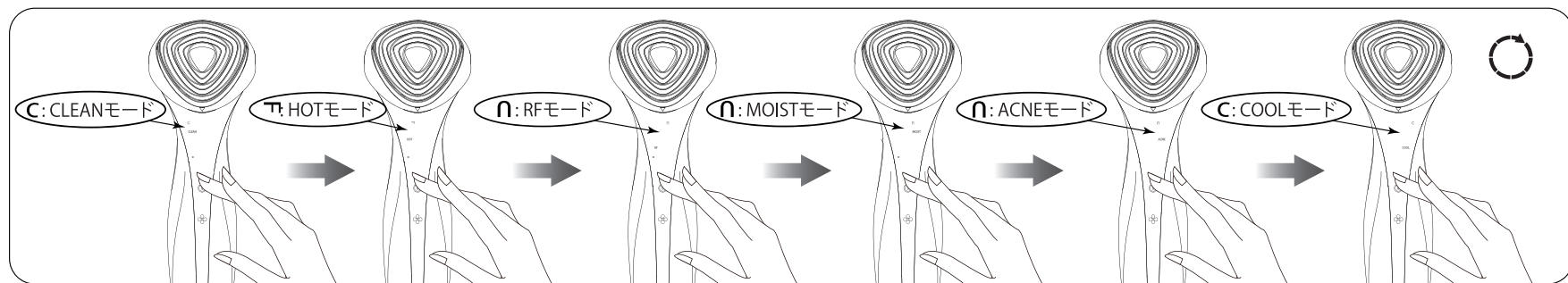


図 4

- レベル切替は1→2→3の順番で繰り返され、各レベルに切替わると対応するランプが点灯します。レベル切替がONしない場合、表示ランプが消灯します。(図5)

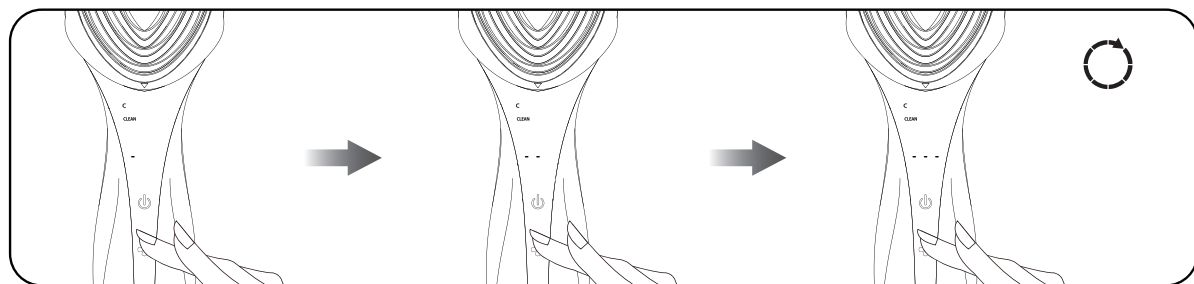


図 5

👁️ 目元用ヘッド

モード	クリーニング	温熱	RF	マイナスイオン	LEDライト	クール
機能	導出＋音波振動	EMS＋音波振動	RF＋EMS＋MC	導入＋音波振動	＼	＼

⚠️ ご注意

- 使用中に、両側の電極が効果的な作動回路を形成できるように、目元用ヘッドの中央部分に皮膚を接触

させていただきます。(図6)

- RFモードで、目元用ヘッドを使用し目の周りにケアする場合は、目の周りの肌は傷つきやすいため、最低設定を使用し、眼球に触れないようにすることをお勧めします。(図7)
- ※ 本製品はギアメモリー機能があります。電源が消耗していない電源オフの状態では、再度電源を入れると、前回のモードを復元します；電源が消耗した後に充電し、再度電源を入れると、初期化になります。

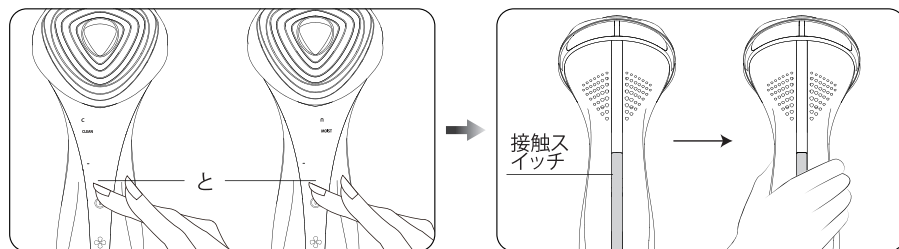


図 6

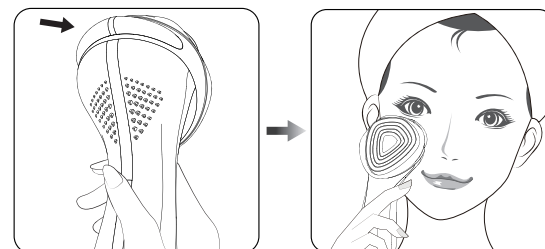


図 7

CANCスキンケアのご案内

※CANCはTOUCHBeautyから肌ケアについて提案された理論です。

スキンケアの4つのステップを含むCANC®科学的スキンケアシステムを内蔵し、美顔器とスキンケア製品のダブルアプローチで効率的にケアできます。

CNAC4ステップケア	機能と使用頻度	使用シーンとスキンケア
c Clean	クリーニングモード(普段使い)	メイク落とし、ダブルクレンジング
a Activate	温熱モード(普段使い)	保湿、フェイシャルマスク
n Nourish	RFモード(2~3天/次)	ジェルとの併用でエイジングケア*
	マイナスイオンモード(普段使い)	美容液使用后、イオン導入
	ライトモード(普段使い)	にきびの跡など気になる箇所に
c Care	クールモード(普段使い)	ハリのある肌へ導く

本製品はスキンケアが付属しません。スキンケア製品と一緒にご使用ください。

*年齢に応じたケア


使いかた


TB-2187

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

※使用する前に洗顔を行い、メイクや皮脂などの汚れを落とします。

※使用する

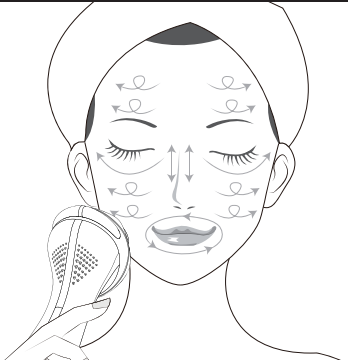CANC	モード	機能説明	使用方法	参考図
C	CLEAN	導出： プラスイオン +音波振動	①固定リングを取り外し、コットンを顔用ヘッドに置いて固定します。 ②メイク落としを塗布します。 ③クリーニングモードに切替えます。 ④強弱レベルを切替えます。 ⑤参考図を確認しながらケアします。	

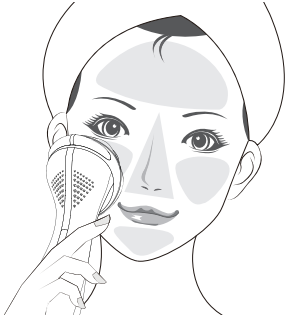ㄗ	HOT	肌のキメを整え： EMS+温熱 +音波振動	①化粧水や美容液等を塗布します ②温熱モードに切替ます。 ③EMS強弱レベルを切替えます。 ④参考図に確認しながら、顔用ヘッドを肌に4-6分ぐらい軽くあてます。	
ㄴ	RF (2MHz)	エイジングケア* をイキイキとし た肌へ導く： EMS+赤光+ 赤外線	①お手持ちのジェルまたは美容液を顔用ヘッドに均等に塗布します。 ②RFモードに切替ます。 ③RF強弱レベルを切替えます。 ④参考図を確認しながら、顔用ヘッドを軽く肌にあって、4-6分ぐらいゆっくりと滑らせます。 ⑤洗顔します。	

*年齢に応じたケア

	MOIST	導入： マイナスイオン ＋音波振動	①美容液を塗布します。 ②マイナスイオンモードに切替ます。 ③強弱レベルを切替えます。 ④参考図に確認しながら、顔用ヘッドを軽く肌にあって、4-6分ぐらいゆっくりと滑らせます。	
	ACNE	にきびの跡 など気になる 箇所に： 赤青混合ラ イト＋赤外線 ＋温熱	①にきび用薬を塗布します。 ②ACNEモードに切替ます。 ③参考図に確認しながら、顔用ヘッドを軽くにきび周りにあて、5分ぐらいゆっくりと滑らせます。	

C	COOL	冷却: 肌の引き締め	①美容液を塗布します。 ②クールモードに切替ます。 ③顔用ヘッドを軽く肌にあって、4-6分ぐらいゆっくりと滑らせます。	
---	------	---------------	---	---

特別説明

※RFモードを使用する際

- イヤリング、指輪、ネックレスなどのアクセサリはすべて外してください。
- ジェルが足りない場合は、適宜ジェルを補充してください。
- 初めてお使いになる場合は、24時間前に少量のジェルまたは美容液を腕の内側に塗布し、ジェルまたは美容液が肌に悪い反応を示さないことを確認するスキンテストを行ってください。
- 使用後24時間経過して肌に問題がなければ継続して使用が可能です。肌にトラブルが見られる場合は使用を中止してください。

- 頬やこめかみなどへの長時間のご使用は避けてください。
- RFモードを使用する際、温かさが感じられない場合、お肌を化粧水などでしっかりうるおし1秒間に2cmのスピードで動かしてご使用ください。熱すぎると感じる場合、1箇所当て続けていたり、動かすスピードが遅い可能性がありますので、少し早めに動かしてご使用ください。
- 皮膚の性質や感覚は人や部位によって異なり、使用効果や使用感など個人差があります。LEDモードのLED光を直接のぞき込まない。

お手入れについて TB-2187

🗑️ お掃除・保管のしかた

※本製品を清潔に保つために、使用後は毎回お掃除をしてください。

- 必ず電源が切れていることを確認してください。やわらかい布やティッシュなどを使用してください。
- 洗剤、シンナー、ベンジン、アルコール、研磨剤などは絶対に使用しないでください。

🗑️ 保管のしかた

本製品にはリチウムイオン電池を使用しております。高温・湿気の多い場所で使用したり、置いたりしないでください。長時間使用しない場合は、満充電して保存してください。

症状	確認事項	対応策
EMSやRFの熱さを感じない	スタンバイ状態/オートオフになった	少しゆっくり動かしてください
	お肌に水分が足りない または乾燥している	お肌を化粧水やゲルで湿らせてからご使用ください
	動かすスピードが速い	少しゆっくり動かしてください
動かない	充電残量が少なくなっていないですか	充電してから再度電源を入れてください
効果が薄い	人によって効果の差がありますが、洗顔などで汚れを落とした後に使用したほうが効果を感じやすいです	なし

アフターサービスについて

1.保証書

本製品には保証書が付いています。お買い上げの販売店で「販売店名、お買い上げ日」などの記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご確認ください。

- 保証期間がすぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。

3.廃棄について

本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の回収方法をご確認の上、処分を行ってください。

4.お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、製造元までお問い合わせください。

保証書

品名	CANC マルチエステ美顔器	型番	TB-2187
無料修理保証	対象部分：本体	期間	ご購入日より1年間
※販売者名	店名・住所・電話		

販売店様へのお願い

必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡してください。

本書は本書記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、ご購入の販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままの場合や、ご購入日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

《 無料修理規定 》

- 1.取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、ご購入の販売店が無料修理をうけたまわります。
- 2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、ご購入の販売店に依頼してください。
- 3.ご転居の場合は、ご購入の販売店にご相談ください。
- 4.ご贈答品で本書に記入してあるご購入の販売店に修理が依頼できない場合はTOUCHBeauty株式会社にご相談ください。
- 5.保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
 - A)使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - B)ご購入後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - C)火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - D)接続する他の機器の異常により生ずる故障および損傷。

E)電池や消耗品などの部品交換の場合。

F)一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障および損傷。

G)車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。

H)ご購入後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。

I)保証書のご提示がない場合。

J)保証書のご購入年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

6.保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

✧本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、ご購入の販売店にお問い合わせください。

✧ご使用による劣化・消耗および消耗品の交換は有料となります。

- 利用目的

お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
これらの記載は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

- 製品仕様

品名	CANC マルチエステ美顔器
品番	TB-2187
入力電圧/電流	DC5V/2A
消費電力	8.5W
電源	充電式(リチウムイオン電池3.7V 1500mAh)
充電方式	Type-Cケーブル

材質	ABS、PC
寸法	86 (H) × 80 (W) × 240 (D) mm
質量	322g
生産国	中国
セット内容	本体、USBコード、収納バッグ、クロス、取扱説明書

製造元：TOUCHBeauty株式会社
 住所：東京都台東区浅草橋5丁目12 - 2
 TEL：03-4362-8880
 MAIL : service@touchbeauty.co.jp