


# TOUCHBeauty

TB-2343

スカルプケア美髪ブラシ  
取扱説明書

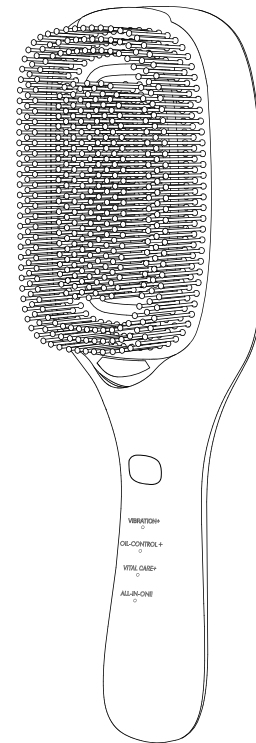

# 目次

---

|             |    |
|-------------|----|
| 01.注意事項/警告  | 1  |
| 02.本製品について  | 4  |
| 03.使用準備     | 5  |
| 04.使用方法     | 7  |
| 05.お手入れと保管  | 11 |
| 06.アフターサービス | 12 |

この度は弊社の製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

## 注意事項/警告

TB-2343

### ⚠ 危険

- ⦿ 次に該当する人は使用しない。  
医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。
- ◎ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- ◎人工心肺など生命維持用医用電子機器
- ◎心電計などの装着型医用電子機器

### ⚠ 警告

- ⦿ 次に該当する方は使用しない。  
下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方や治療を受けている方は医師に相談してください。
- ◎心臓疾患、障害及びその疑いのある方
- ◎自分で意思表示できない方
- ◎温度や刺激の感覚が自覚できない方
- ◎自己免疫疾患
- ◎医師の治療を受けている方
- ◎医師からマッサージを禁じられている方
- ◎アトピー性皮膚炎・脂漏性皮膚炎・湿疹など皮膚疾患がある方
- ◎アレルギー体質の方、金属アレルギーの方
- 1 ◎敏感肌または頭皮が弱い方

- ◎妊娠中・授乳中・生理中の方
- ◎急性疾患・伝染病疾患のある方 ◎悪性腫瘍のある方
- ◎結核性疾患のある方 ◎内臓疾患のある方
- ◎骨折や骨粗しょう症など、骨に異常のある方
- ◎神経障害・皮膚知覚障害のある方
- ◎自ら操作が行えない方、安静を必要とする方、四肢の不自由な方
- ◎意思表示のできない方、麻痺および知覚障害の方
- ◎顎関節症の方 ◎黒皮症の方
- ◎目や顔に疾患がある方・治療歴のある方
- ◎ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方
- ◎出血性疾患・血友病疾患などの血液異常の方 ◎高血圧の方
- ◎心臓疾患のある方、血栓のある方 ◎体調のすぐれない方
- ◎骨折、整形などで使用部位に埋め込み手術を受けた方
- ◎飲酒後や疲労の激しい場合
- ◎薬（抗凝固剤等、血液が固まりにくくなる成分を含んだ薬）を服用中の方
- ◎眠気をさそう薬を服用中の方
- ◎発熱（38℃以上）している方
- ◎乳幼児や成長過程の子供には使用しない。使用させない。ペットには使用しない。
- 指定の部位以外や次のような部位には使用しない。
- ご使用に不安がある方は、使用前に医師に相談してください。
- ◎整形手術をした部位
- ◎皮膚炎・過度の日焼けなど、皮膚に異常がある場合およびその部位

◎ニキビ・傷・湿疹・腫れもの・化膿性疾患のある場合およびその部位

◎かゆみやほてりのある部位

◎膨らんだほくろ・ウイルス性のイボ

◎のどぼとけ ◎鼻・耳・唇 ◎眼球・まぶた・目のまわり

◎口内や陰部・粘膜など

◎心臓の周辺部位(みぞおちまわり) ◎生理中の腹部

◎当日、脱毛処理をした部位

◎金属、シリコン等を埋め込んである部位

⊗子供や身体の不自由な人だけでの使用は避ける。

未成年の方は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用する。

また、子供の手の届かない場所に保管する。

事故やけがをする原因となります。

⊗取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。

けがや本体が故障する原因となります。

⊗分解や修理・改造はしない。

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または製造元にご相談ください。

⊗不安定な場所に置かない。また、本体や付属品を落としたり、ぶつかけたりしない。

けがや本体が故障する原因になります。

⊗本体および付属品が、異臭・異常発熱したときは使用を中止する。

破損・発火の原因になります。

- ジェルなどが手についた状態で使用しない。  
滑って本体が落下し、けがをするおそれがあります。
- LEDの光を直接のぞき込まない。  
目を傷める原因となります。
- ドライヤーと一緒に使用したり、ドライヤーなどで本体や付属品を乾燥しない。  
部品の変形・故障の原因となります。
- サウナなど高温多湿になる場所では、使用しない。  
変色・故障の原因となります。
- 電気刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げない。  
レベルは少しずつ調節してください。
- 市販のUSB-ACアダプターまたはモバイルバッテリーは必ず定格出力5.0V/1.0Aのものを使用してください。

## 本製品について

TB-2343

### ●パッケージ内容 (図1)

- ①本体
- ②Type-Cケーブル
- ③取扱説明書
- ④収納袋

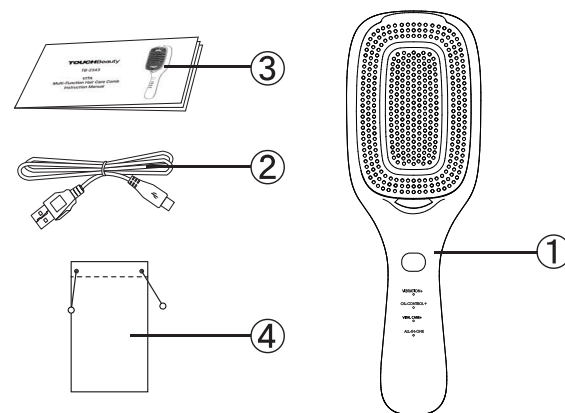


図1

● 各部のなまえ(図2)

- ①電源スイッチ/モード
- ②ライト
- ③ブラシ(取り外し可)
- ④LEDライト
- ⑤メタルピン
- ⑥マイナスイオン吹出口
- ⑦接触スイッチ
- ⑧接続端子

## 使用準備

TB-2343

※初めて使用する場合は、必ず充電してください。

● 充電のしかた

- ・ USBケーブルのUSBコネクタをUSB-ACアダプター(またはモバイルバッテリー)のUSB接続端子に差し込みます。(図3)

※5.0V/1A出力できるものを使用してください。

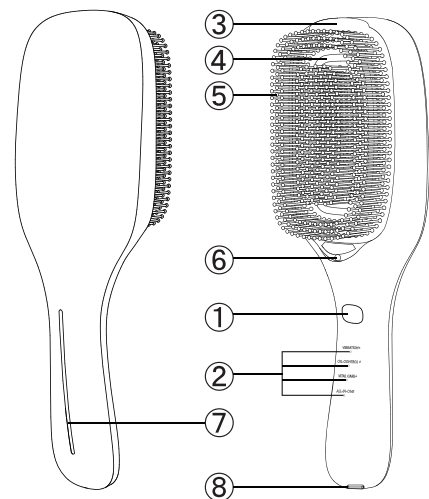


図2

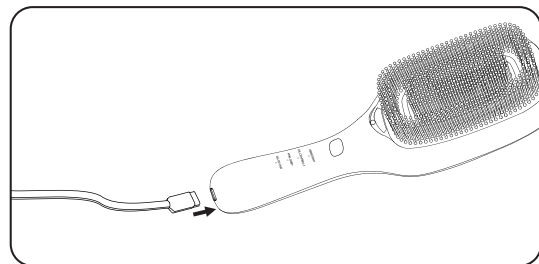


図3

- 充電中、通電ランプが点滅します。充電が完了すると、通電ランプが白色に点灯します。(図4)

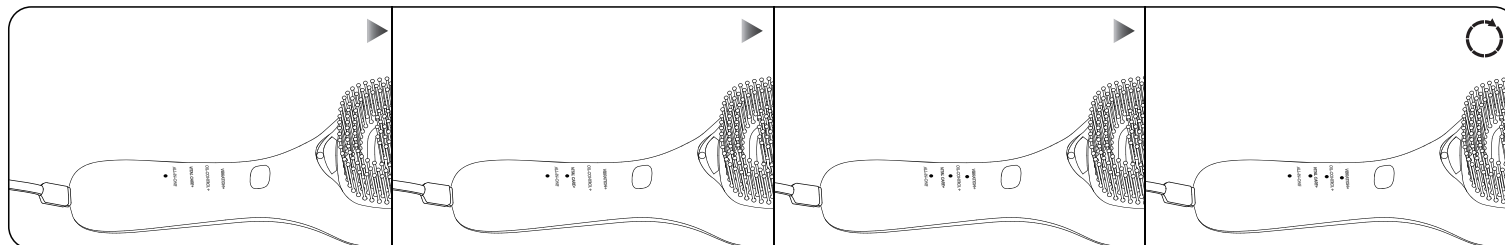


図4

- 約2時間で充電が完了します。1回のフル充電で、連続使用の場合約90分使用できます。  
(周囲温度など使用条件によって異なります。)
- 低電圧保護により、電量不足の場合は点灯します。この時は、充電してください。
- 本機は充電しながらのご使用ができます。

#### ☎はたらき

#### 電源オン/オフとモード切替

#### ☎電源オン/オフ

オフの状態で電源スイッチを1秒長押し、電源をオンにします。

初めて使うときは、初期設定はVIBRATION+モードになります。

オンの状態で電源スイッチを1秒長押し、電源をオフにします。

※バッテリー残量が少なくなる場合、自動的に電源が切れます。ご使用前に十分充電してください。

### 🔊モードの選び方

オンの状態で電源スイッチを短押し、4つのモードを切替ます。  
1つのモードだけで約5分間作動してから自動的に切れます。  
運転終了時の設定状態を記憶し、メモリー機能が付いています。

### 🔊レベルの選び方

各モードを2回押し、レベルを切替ます。  
レベルローからハイまで順次切替える事ができます。ランプ表示はホワイト、オレンジ、レッドと分けて点灯します。  
(注:VIBRATION+モードではレベル切り替えはありません)。

## 使用方法

TB-2343

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

| ボタン    | 使いかた                | モード切替 | 運転時間                       |
|--------|---------------------|-------|----------------------------|
| 電源スイッチ | 電源スイッチを1秒長押し、電源を入れる | あり    | 電源スイッチを長押し(約 1 秒)で、電源オフ    |
| モード切替  | 電源スイッチを短押し          | あり    | 電源オン状態でボタンを短押しで4つのモードを順次変更 |

| モード                 | 機能                                                                                                                             | レベル調節                                                                                                                                                                                                                 | 電源オフ                                                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| VIBRATION+<br>モード   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・振動</li> <li>・マイナスイオン</li> </ul>                                                        | 無し                                                                                                                                                                                                                    | 5分間連続使用後、自動的に電源オフになります                                                     |
| OIL-CONTROL+<br>モード | <ul style="list-style-type: none"> <li>・マイナスイオン</li> <li>・LED ブルーライト</li> <li>・EMS</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・モードを選択後、電源ボタンをダブルクリック毎にレベルを変更します。</li> <li>・初期モードは、ローレベルに設定されています。</li> <li>・ローレベル<br/>表示ランプ: ホワイト</li> <li>・ミドルレベル<br/>表示ランプ: オレンジ</li> <li>・ハイレベル<br/>表示ランプ: レッド</li> </ul> | 各モードを選択後、モード変更せずに、5分間連続使用すると自動的に電源がオフとなります。<br><b>【※長時間の連続使用を回避する安心設計】</b> |
| VITAL CARE+<br>モード  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・マイナスイオン</li> <li>・LEDレッドライト</li> <li>・EMS</li> </ul>                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
| ALL-IN-ONE<br>モード   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・振動</li> <li>・マイナスイオン</li> <li>・LED ブルーライト</li> <li>・LEDレッドライト</li> <li>・EMS</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |

※電源スイッチ/モードボタンを短押し、モードを切替えます。

※お好みに応じて各モードを組み合わせでパターンを選択してください。

※各部位の使用モードは必ず守ってください。(図5)



図5

※OIL-CONTROL+/REVITALIZE+/ALL-IN-ONEの3モードでは、EMSレベルが調節可能です。(図6)



図6

## 👁 使用方法

※お好みに応じて各モードを組み合わせるパターンを選択してください。

| モード  | VIBRATION+                                                              | OIL-CONTROL+                                                                                  | VITAL CARE+                                                                                  | ALL-IN-ONE                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機能   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・振動</li> <li>・マイナスイオン</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・マイナスイオン</li> <li>・LED ブルーライト</li> <li>・EMS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・マイナスイオン</li> <li>・LEDレッドライト</li> <li>・EMS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・振動</li> <li>・マイナスイオン</li> <li>・LED ブルーライト</li> <li>・LEDレッドライト</li> <li>・EMS</li> </ul> |
| 使用頻度 | 毎日                                                                      | 週に3～5回(あくまでも目安となります。)                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                |

※メモリー機能搭載。バッテリー残量がある場合、運転終了時の設定状態を記憶します。

※バッテリー切れで運転終了した場合、電源オンで初期設定に戻ります。

※朝晩、VIBRATION+モードをご利用いただく事をお勧めします。

※本製品を使用する際は、本体を持つ時に製品背面の接触スイッチに触れてください。(図6)

※頭皮にブラシを、垂直に軽くあててください。

強く押しあてないでください。(図7)

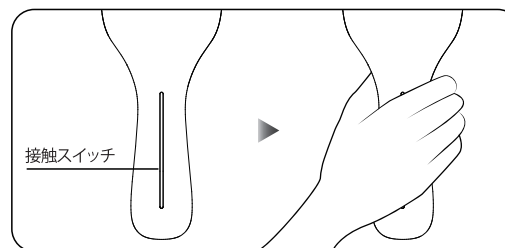


図6



図7

## 故障かな?と思ったら

TB-2343

| 症状           | チェックポイント  | 対処方法                             |
|--------------|-----------|----------------------------------|
| ブラシが振動しない    | 電量不足/電池切れ | 取扱説明書に従って充電を実施してください             |
| ピンが変形        | 外力によるもの   | ピンが潰れて変形するのを防ぐため、ピンを上にして保管してください |
| その他の異常・故障がある |           | すぐに使用を中止して、製造元にお問い合わせしてください。     |

## お手入れと保管のしかた

TB-2343

### お手入れ

必ず電源をオフにして、USBケーブルを取り外してからお手入れ・保管してください。  
本体の汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ります。

- シンナー・ベンジン・アルコールなどは絶対に使用しない。
- 本体を水洗いしない。
- 洗浄する際には、必ずブラシを本体から取り外しブラシを洗浄してください。  
布を水またはぬるま湯に浸し、よく絞ってから拭き取ります。(図8)
- 洗浄後のブラシは、必ず良く乾燥させてから本体に装着してください。
- ☼保管
  - 本製品には、リチウムイオン電池を使用しております。
  - 高温・湿気の多い場所で使用したり、放置しないでください。
  - 長時間使用しない場合は、6ヶ月毎に充電して保管してください。

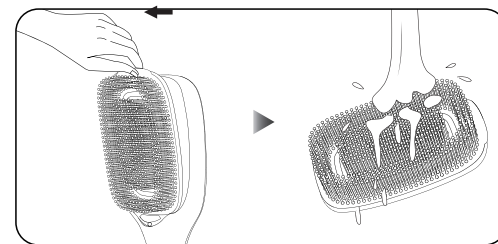


図8

## アフターサービスについて

### 1.保証書

本製品には保証書が付いています。お買い上げの販売店で「販売店名、お買い上げ日」などの記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

### 2.修理を依頼されるとき

・保証期間中は

商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご確認ください。

- ・保証期間がすぎているときは  
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。
- 3.廃棄について  
本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の回収方法をご確認の上、処分を行ってください。
- 4.お問い合わせ  
アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、製造元までお問い合わせください。

保証書

|        |             |              |         |
|--------|-------------|--------------|---------|
| 品名     | スカルプケア美髪ブラシ | 型番           | TB-2343 |
| 無料修理保証 | 対象部分：本体     | 期間：ご購入日より1年間 |         |
| ※販売者名  | 店名・住所・電話    |              |         |

販売店様へのお願い  
必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しく下さい。  
13 本書は本書記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。

上記「無料修理保証」期間中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、ご購入の販売店に修理をご依頼ください。

- ・ 所定記入欄が空欄の場合や、ご購入日がわかるレシート・明細書がない場合、本書は有効とはなりません。
- ・ 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

《 無料修理規定 》

- 1.取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、ご購入の販売店が無料修理をうけたまわります。
- 2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、ご購入の販売店に依頼してください。
- 3.ご転居の場合は、ご購入の販売店にご相談ください。
- 4.ご贈答品で本書に記入してあるご購入の販売店に修理が依頼できない場合はTOUCHBeauty株式会社にご相談ください。
- 5.保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
  - A)使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
  - B)ご購入後の転倒・落下などによる故障および損傷。
  - C)火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
  - D)接続する他の機器の異常により生ずる故障および損傷。

E)電池や消耗品などの部品交換の場合。

F)一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障および損傷。

G)車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。

H)ご購入後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。

I)保証書のご提示がない場合。

J)保証書のご購入年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

6.保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

☆ 本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、ご購入の販売店にお問い合わせください。

☆ ご使用による劣化・消耗および消耗品の交換は有料となります。

・利用目的

お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記載は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

・製品仕様

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 品名      | スカルプケア美髪ブラシ                   |
| 品番      | TB-2343                       |
| 入力電圧/電流 | DC5V/1A                       |
| 消費電力    | 5W                            |
| 電源      | 充電式(リチウムイオン電池3.7V 800mAh)     |
| 充電方式    | Type-Cケーブル                    |
| 材質      | ABS、ステンレス、シリコン                |
| 寸法      | 約78(H)×234(W)×55(D)mm         |
| 質量      | 241g                          |
| 生産国     | 中国                            |
| セット内容   | 本体、USBコード、ブラシ、収納バッグ、<br>取扱説明書 |

製造元:TOUCHBeauty株式会社  
住所:東京都台東区浅草橋5丁目12 - 2  
TEL:03-4362-8880  
MAIL: [service@touchbeauty.co.jp](mailto:service@touchbeauty.co.jp)